


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ















A. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

2. ΧΡΗΣΗ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ



3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

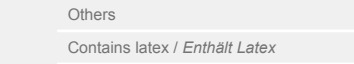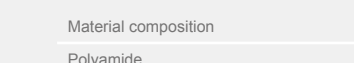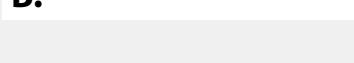

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ PUSH CARE

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα προϊόντα Push care παρέχουν αποτελεσματικές λύσεις όταν περιορίζεται η ελευθερία κινήσεων σας λόγω τραυματισμού ή διαταραχής.

Η νέα σας επιστραγαλίδα είναι προϊόν Push care και προσφέρει αποτελεσματικότητα, άνεση και άριστη ποιότητα. Η επιστραγαλίδα Push care παρέχει ανακούφιση από τον πόνο και επιπλέον σταθερότητα χάρη στη ρυθμιζόμενη πίεση.

Τα προϊόντα Push care είναι κανονιστά και κατασκευάζονται για εσάς με εξαιρετική φρονιίδα. Αυτό εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια και ξέγνοιαστη χρήση.

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες προϊόντων πριν από τη χρήση της επιστραγαλίδας Push care. Εάν έχετε ερωτήσεις, συμβουλευτείτε τον μεταπωλητή σας ή στείλετε e-mail στη διεύθυνση info@push.eu.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η επιστραγαλίδα Push care σκεπεί σμπίτηση στον αστράγαλο, βελτιώνοντας την αίσθηση σταθερότητας της άρθρωσης. Αυτή η σμπίτηση μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες. Η επιστραγαλίδα έχει άφουρη εφαρμογή και μπορεί να φορεθεί σχεδόν με οποιοδήποτε παπούτσι. Οι απορροαζόμενες ζώνες άνεσης από υλικό με ελαστική έχουν δημιουργηθεί για τις ευαίσθητες περιοχές του αστραγάλου.

Η επιστραγαλίδα είναι κατασκευασμένη από Sympress™, ένα υψηλής ποιότητας υλικό που προσφέρει άνεση. Η χρήση μικροϊνών καθιστά το εσωτερικό μαλακό και διατηρεί το δέρμα στεγνό. Η επιστραγαλίδα Push care εφορμιάζει εύκολα και μπορεί να πλυθεί άφοβα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Ήττια παραμόρφωση
- Ήττιος ερεθισμός κάψας
- Ήττια παραμόνευσα αστάθεια
- Αρθρίδια χωρίς αστάθεια

Δεν υπάρχουν γνωστές διαταραχές εξάρτιας των οποίων δεν μπορεί ή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται νάρθηκας.Σε περίπτωση κακής κυκλοφορίας του αίματος στα άκρα, η χρήση επιστραγαλίδας μπορεί να προκαλέσει υπέρταση. Αποφύγετε να δεσέτε τον νάρθηκα υπερβολικά σφιχτά στην αρχή.

Ο πόνος είναι πάντα ένδειξη προειδοποίησης. Εάν ο πόνος παραμένει ή οι ενόχλησεις επιδεινώνονται, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον ιατρό ή τον θεραπευτή σας.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η επιστραγαλίδα διατίθεται σε 5 μεγέθη. Τοποθετήστε το πόδι έτσι ώστε να σχηματίζει γωνία 90° με την κνήμη. Στη συνέχεια, μετρήστε την περίμετρο της πτέρνας και του πάνω μέρους του ποδιού, όπως φαίνεται στην εικόνα της συσκευασίας. Ο πίνακας της συσκευασίας δείχνει το σωστό μέγεθος επιστραγαλίδας για το πόδι σας.

- Τοποθετήστε τη βάση στο πόδι σας και βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει σφιχτά. Κρατήστε το πόδι σε γωνία 90° με την κνήμη. Στη συνέχεια, κλείστε το ελαστικό δέσιμο μπροστά.
- Τυλίξτε τον μακρύ ελαστικό μόντα γύρω από το πέλμα/τημίμα του ποδιού.
- Κλείστε τον μακρύ ελαστικό μόντα στην εσωτερική πλευρά του ποδιού πάνω από τον κοινό ελαστικό μόντα, ακριβώς πάνω από το οστό του αστραγάλου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ



Για την προώθηση της υγιεινής ή τη μεριστοποίηση της διαδικασίας ζωής του νάρθηκα, είναι σημαντικό να πλένετε τα στρώματα τακτικά, ακολουθώντας τις οδηγίες πλύσης.

Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον νάρθηκα για κάποιο διάστημα, συνιστάται να πλύνετε και να στεγνώσετε τον νάρθηκα πριν από την αποθήκευσή του.

Πριν από το πλύσιμο, κλείστε τα δεσμάτα από άγκιστρα και θηλίες για να προστατέψετε τον νάρθηκα και τα άλλα ρούχα.

Ο νάρθηκας μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασίες έως και 30 °C, σε πρόγραμμα για ευαίσθητα υφάσματα ή στο χέρι. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικούς παράγοντες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ήπιο πρόγραμμα πλύσης: έπειτα, απλώστε τον νάρθηκα για να στεγνώσει φυσικά (όχι κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε στεγνωτήριο).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Για την ορθή χρήση του νάρθηκα Push ενδέχεται να απαιτείται διάγνωση από ιατρό ή θεραπευτή.
- Οι νάρθηκας Push έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογή σε δέρμα χωρίς βλάβες. Αν το δέρμα φέρει βλάβες, πρέπει να καλυφθεί πρώτα με κατάλληλο υλικό.
- Η βέλτιστη λειτουργία μπορεί να επηρευθεί μόνο με την επιλογή του σωστού μεγέθους. Δοκιμάστε τον νάρθηκα προτού τον αγοράσετε για να ελέγξετε το μέγεθος του. Το ειδικευμένο προσωπικό του μεταπωλητή σας θα σας υποδείξει τον καλύτερο τρόπο για την τοποθέτηση του νάρθηκα Push. Συνιστάται να φυλάξετε τις παλαιές πληροφορίες προϊόντων σε ασφαλές σημείο, ώστε να ανατρέχετε στις οδηγίες τοποθέτησης όποτε είναι απαραίτητο.
- Συμβουλευτείτε έναν ειδικό για νάρθηκας αν ο προϊόν απαιτεί ατομική προσαρμογή.
- Ελέγχετε κάθε φορά τον νάρθηκα Push πριν από τη χρήση για σημάδια φθοράς εξάρτησών ή ραφών. Η βέλτιστη απόδοση του νάρθηκα Push μπορεί να είναι εγγυημένη μόνο εάν το προϊόν είναι άθικτο.
- Στο πλαίσιο του κανονισμού 2017/745 της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ο χρήστης πρέπει να αναφέρει τυχόν σοβαρά περιστατικά για το προϊόν στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχετε αγοράσει το προϊόν.

Το σήμα Push® είναι καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της Nea International bv

SLOVENSKY

PUSH CARE ORTÉZA ČLENKA

ÚVOD

Výrobky Push care predstavujú účinné riešenie pri obmedzení vlnosti telesného pohybu dôsledkom úrazu alebo ochorenia. Vaša nová ortéza členka je výrobkom línie Push care, ktorej charakteristiku je vysoká efektívnosť, pohodlnosť a kvalita. Charakteristickou je vysoká efektívnosť, pohodlnosť a kvalita. Push care ortéza členka zaisťuje úľavu od bolesti a pocit väčšej stability rôsobením nastaviteľného tlaku.

Výrobky Push care sú charakteristické svojou pokročilosťou a ich výroba je venovaná najväčšiu starostlivosť. Tieto artikuly zaisťujú ich maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri nosení.

Pred použitím Push care ortézy členka si dobre preštudujte tieto informácie o výrobku.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obráťte sa, prosím, na svojho predajcu. Prípadne nám svoje otázky pošlite e-mailom na adresu info@push.eu.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Ortéza členka stahuje oblasť okolo členkového kĺbu, čím sa zvyšuje stabilita jeho stability.

Silú kompresie možno podľa potreby upraviť. Ortéza členka dokonale sedí a dá sa nosiť prakticky v každej obuvi. Okolo zraniteľných oblastí členka sú vytvorené tzv. komfortné zóny z výrňového materiálu.

Ortéza je vyrobená z vysoko kvalitného a pohodlného materiálu Sympress™. Vďaka použitiu mikrovlákn je materiál vnútra mäkký na dotyk a udržuje suchosť pokožky. Push care ortéza členka sa jednoducho nasadzuje a dá sa bez problémov prať.

INDIKÁCIE

- Mierna distorzia
- Mierne kapsulárna iritácia
- Slabá reziduálna nestabilita
- Artróza bez nestability

Nie je známa žiadna porucha, pri ktorej by sa ortéza nedala alebo nesmela nosiť. Pri zlom prekrvovaní končatín môže ortéza srsbovať hyperémiu (prekvenie). Zo začiatku dávajte pozor, aby ste ortézu príliš neutahovali.

Bolesť je vždy varovným znakom. Pokiaľ bolesť pretrváva alebo sa ťažkosť nohu nájde v tabuľke na obale.

VÝBER SPRÁVNEJ VELKOSTI/NASADENIE

Ortéza členka sa vyrába v 5 veľkostiach. Postavte chodidlo tak, aby s holoú noh vytváralo 90° uhol. Potom si podľa obrázku na obale omerajte obvod okolo päty a priehlavku. Správnu veľkosť ortézy pre svoju nohu nájdete v tabuľke na obale.

- Nasuňte si podklad okolo nohy tak, aby dobre sedel. Postavte chodidlo tak, aby s holoú noh vytváralo 90° uhol. Potom vpredu zapnite elastické zapínanie.
- Dlhý elastický pás ovíňte okolo prednej časti chodidla.
- Upevnite dlhý elastický pás znútra chodidla cez krátky elastický pás tesne nad členkovú kosťou.

POKYNY NA PRANIE



V záujme hygieny a maximálneho predĺženia životnosti bandáže je dôležité bandáž pravidelne prať, pričom postupuje v súlade s pokynmi na pranie.

Ak zamýšľate nejaký čas bandáž nepoužívať, odporúčame, aby ste ju pred odloženie vyprali a vysušili.

Pred praním na ochranu ortézy a ostatnej bielizne uzavrite suchý zip. Ortéza sa môže prať pri teplote do 30 °C v režime jemných tkanín alebo v rukách. Nepoužívajte bieliacie prípravky.

Možno použiť jemné odšetrovanie. Potom nechajte ortézu voľne uschnúť na vzduchu (nie v blízkosti tepelného zdroja; nesušte pomocou sušičky).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

- Na správne použitie ortéz Push je vhodné stanovenie diagnózy lekárom alebo terapeutom.
- Bandáže Push boli navrhnuté na nosenie na nepoškodenej pokožke. Poškodenú pokožku najprv prekryte vhodným materiálom.
- Optimálne fungovanie môžete dosiahnuť len pri výbere správnej veľkosti. Pred kúpu si bandáž nasadte a skontrolujte jej veľkosť. Odborný personál predajcu vám vysvetlí najlepšiu srsboh, ako si bandáž Push nasadiť. Odporúčame vám, aby ste uchovali tieto informácie o výrobku na bezpečnom mieste. Môžete si tak kedykoľvek overiť pokyny na nasadzovanie bandáže.
- Pokiaľ výrobok vyžaduje individuálnu úpravu, poraďte sa s odborníkom na ortézy.
- Ortízy Push si pred každým nasadením najskôr skontrolujte, aby ste vždy postrehi prípadné známky opotrebenia alebo starnutia súčasti alebo šitia. Optimálnu funkciu ortézy Push možno zaručiť len vtedy, ak je výrobok neporušený.
- V zmysle nariadenia EÚ 2017/745 o zdravotníckych pomôckach musí používať výrobcovi a príslušné úradny členského štátu, v ktorom má používať bydlisko, nahlasiť všetky závažné nehody súvisiace s týmto výrobkom.

Push® je registrovaná známka spoločnosti Nea International bv

한국어

PUSH CARE 발목보호대

소개

Push care 보호대는 부상이나 장애로 인한 움직임이 부자연스러운 당신을 위한 효과적인 솔루션을 제공합니다.

효과가 높으며, 편안한 사용법, 고품질이 특징인 Push care 제품의 새로운 발목보호대입니다. Push care 발목보호대는 조정 가능한 압박을 통해 통증을 완화시키고 안정감을 향상시킵니다.

혁신적인 Push care 제품은 최상의 보조 기능을 발휘합니다. 매우 안전하고 편하게 사용할 수 있습니다.

Push care 발목보호대를 사용하기 전에 제품 정보를 주의해서 읽어 보세요. 궁금한 점이 있으시면 판매점에 문의하시거나, info@push.eu로 이메일을 보내세요.

제품 특성

Push care 발목보호대는 발목관절에 압박을 제공하여 관절의 안정감을 향상시킵니다. 개인 선호에 따라 압박을 쉽게 조절할 수 있습니다.

발목보호대는 연백한 핑을 보여주며 어떠한 신발에서도 착용이 가능합니다. 패딩 소재의 캄포트 존은 발목의 취약한 부위를 위해 만들어졌습니다.

보호대는 편안한 고품질 소재 Sympress™으로 제조되었습니다. 극세사를 사용하여 내부가 부드럽으며 피부를 건조하게 유지합니다. Push care 발목보호대는 사용이 쉬우며 세척이 편합니다.

적용증

- 경미하게 변 발목
- 경미한 관절염 자극
- 기타 경미한 불안정증
- 안정적인 관절염

보호대를 착용할 수 없거나 착용하면 안되는 것으로 알려진 장애는 없습니다. 사지에 열혈 순환이 좋지 않을 경우, 보호대는 종혈증을 유발할 수 있습니다. 보호대를 처음 착용 시 너무 딱 까지 않도록 하십시오.

통증이 있다면 주의하셔야 합니다. 통증이 지속되거나 악화되면, 주치의나 물리치료사에게 문의하세요.

사이즈 선택 / 피팅

발목보호대는 5가지 사이즈가 있습니다. 다리와 발목이 90도를 이룰 수 있게 다리를 세우세요. 포장의 크기와 같이 발뒤꿈치에서 발목 위까지의 둘레를 잹니다. 포장의 표에 따라 정확한 발목보호대 사이즈를 선택합니다.

- 보호대를 발에 밀어 넣고 편안한 상태로 끼웁니다. 무릎 아래 발을 90°로 유지합니다. 알록 고정띠를 고정합니다.
- 발 앞쪽까지 긴 고정띠를 감습니다.
- 긴 고정띠를 북새바로 위쪽 짧은 고정띠 부위에서 발 안쪽으로 고정합니다.

세탁 지침



위생을 개선하고 보호대의 수명을 최대화하기 위해 세탁 지침에 따라 보호대를 정기적으로 세탁해야 합니다.

한 동안 보호대를 사용하지 않으려면 보관하기 전에 보호대를 세척하고 건조하는 것이 좋습니다.

세탁하기 전에 후크와 루프 패스너를 잠그 보호대와 세탁물을 보호하세요. 최대 30°C의 온돈에서 섬세한 직물 모드 또는 손으로 보호대를 세탁할 수 있습니다. 표백제를 사용하지 마십시오.

부드럽게 회전하는 탈수기를 사용할 수 있습니다. 탈수 후 보호대를 햇빛줄에 걸어서 옥외에서 건조하십시오(드라이기 또는 드럼 건조기를 사용하지 마십시오).

중요 사항

- Push 보호대를 적합하게 사용하기 위해 의사 또는 물리치료사의 진단이 필요할 수 있습니다.
- Push 보호대는 부상을 입지 않은 피부에 착용하도록 고안되었습니다. 부상을 입은 피부는 먼저 적절한 소제로 덮어야 합니다.
- 정확한 사이즈를 선택해 최 최적의 기능을 발휘할 수 있습니다. 구입하기 전에 보호대를 착용하여 사이즈를인지 확인하십시오. 재판매업체에 전문 직원이 Push 보호대를 착용하는 최상의 방법을 설명해 드릴 것입니다. 필요할 때 피팅 지침을 보기 위해 본 제품 설명서를 안전한 장소에 보관하는 것을 권장합니다.
- 제품의 개별 조정이 필요하면 보호대 전문가에게 문의하십시오.
- Push 보호대를 사용하기 전에 마모되거나 낡은 부품이나 연결부위가 있는지 확인하십시오. Push 보호대가 온전한 상태로 때때만 최적의 성능이 보장됩니다.

Push®는 Nea International의 등록 상표입니다.

РУССКИЙ

ПОДБОР РАЗМЕРА

Сантиметровой лентой измеряется окружность голеностопного сустава: через пятку к подъему стопы (см. рисунок на упаковке). Ортезы Push care Ankle Brace на голеностопный сустав представлены в пяти размерах (см. таблицу размеров на упаковке) раздельно для правого и левого голеностопных суставов. Чтобы убедиться в правильном выборе размера, рекомендуется примерить ортез.


ПРАВИЛА УХОДА

Для того чтобы ортез оставался гигиеничным и чтобы продлить срок его службы, важно регулярно его стирать, соблюдая инструкции по стирке.

Если вы не собираетесь использовать ортез в течение некоторого времени, рекомендуется вымыть и высушить ортез перед хранением.

Перед стиркой застегните застёжки-липучки «Велкро».

Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная стирка при температуре не выше +30 °C. Не применяйте хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Сушите не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

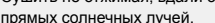

СОСТАВ

Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала Sympress™. Использование микроволокна обеспечивает ощущение мягкости и поддерживает кожу сухой.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1, 2, 3, 4, 5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться в оригинальной упаковке, при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

Артикул	1.2.0
Производитель	NEA International BV (NEA Интернешнл Бив) www.push.eu
Импортер	ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бульварный проезд, д. 14, стр. 2.
Претензии направлять	Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: sk@nikamed.ru .
Товар является медицинским изделием	Отпускается без рецепта
Регистрационное удостоверение	№ФС 2009/04878 от 09.03.2016 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен

Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: sk@nikamed.ru.

PGT

Декларация о соответствии
№ РОСС RU 14-NEA.Н.АВ3 В.00133/19
(с 02.04.2019 г. по 01.04.2022 г.) выдана ООО «Сервис Плюс»

Push® является зарегистрированной торговой маркой компании «Неа Интернешнл бив» (Nea International bv)



Для получения подробной информации о дистрибьюторе в вашей стране перейдите по ссылке www.push.eu/distributors

РУССКИЙ

Ортезы серии Care* торговой марки Push — оптимальное решение для защиты и профилактики.

Ортезы Push Care предназначены, в первую очередь, для профилактического применения в случаях физических нагрузок.

Эти ортезы успешно защищают человека также в случаях незначительных травм и умеренных нарушениях функции суставов. Отличительной особенностью является легкая степень фиксации и умеренная компрессия.

Продукция Push care является инновационной и произведена для Вас с особой тщательностью для максимальной безопасности и комфортного использования.

Перед использованием ортеза внимательно прочитайте инструкцию.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо по адресу sales@nikamed.ru

* Care – забота

ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ PUSH CARE ANKLE BRACE АРТИКУЛ: 1.20.1

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Незначительные деформации голеностопного сустава.
- Бурситы.
- Легкая нестабильность голеностопного сустава (при небольшой нагрузке).
- Артроз голеностопного сустава без признаков нестабильности.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Правильная последовательность наложения определяется по увеличению количества символов «точка» на застёжке-липучке «Велкро».

- Расстегните все застёжки-липучки «Велкро». Наденьте основу ортеза на стопу. Расположите стопу под 90° относительно голени. Затем застегните застёжку на передней части ортеза.
- Закфиксируйте эластичные ленты в виде «восьмерки» вокруг стопы.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Правильное использование ортеза Push care Ankle Brace может потребовать консультации лечащего врача.
- Изделия Push предназначены для того, чтобы их использовали на неповрежденной коже. Если кожа повреждена, то она должна быть защищена подходящим материалом перед надеванием ортеза.
- Оптимальное функционирование может быть достигнуто только посредством выбора правильного размера. Примерьте изделие перед покупкой, чтобы проверить его размер. Специальность компании-дистрибьютора объяснит Вам правила надевания ортеза. Мы рекомендуем сохранить эту информацию об изделии в надежном месте, чтобы иметь возможность обратиться к инструкциям по подгонке изделий в случае необходимости.

- Функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза Push care Ankle Brace или при расхождении швов. Не забывайте проверять ортез Push care Ankle Brace на наличие признаков повреждения перед каждым использованием.
- В рамках постановления ЕС 2017/745 о медицинских изделиях пользователь должен сообщать о любом серьезном инциденте, связанном с изделием, производителю и компетентному государственному органу, в котором зарегистрирован пользователь.

СВОЙСТВА ТОВАРООКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Ортез Push care Ankle Brace на голеностопный сустав обеспечивает легкую фиксацию и регулируемую компрессию сустава. Ортез можно носить практически в любой повседневной обуви. Смичающие вставки над подпяжками для максимального удобства ношения ортеза. Высококачественный комфортный материал Sympress™ обеспечивает оптимальный влаго-воздухообмен (система термоконтроля).

Ортез Push care Ankle Brace на голеностопный сустав удобен для самостоятельного наложения без посторонней помощи и рассчитан на регулярный гигиенический уход (стирку).

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к использованию ортеза Push care Ankle Brace на голеностопный сустав не выявлено. Избегайте чрезмерно тугого наложения ортеза Push care Ankle Brace на голеностопный сустав для

