

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ PUSH MED

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα προϊόντα Push med παρέχουν αποτελεσματικές λύσεις σε περίπτωση διαταραχής ή μειωμένης λειτουργίας του κνημιακού συστήματος.

Ο νέος σας νάρθηκας επιγονατίδας είναι προϊόν Push med και προσφέρει αποτελεσματικότητα, άνεση και άριστη ποιότητα. Ο νάρθηκας επιγονατίδας Push med διαθέτει την καλύτερη και προσαρμοσμένη ανακούφιση από τον πόνο. Αυτό οφείλεται τη στατική δύναμη ή μηχανική υποστήριξη ή ρυθμιζόμενη πίεση και η διατήρηση καλής θέσης αποκόμης ή βάση της αποδόσης του προϊόντος.

Τα προϊόντα Push med είναι καινοτόμα και κατασκευάζονται για εσάς με εξαιρετική φροντίδα. Αυτό εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια και μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Για την προώθηση της καινοτομίας από τη χρήση του προϊόντος.

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση του νάρθηκα επιγονατίδας Push med. Εάν έχετε ερωτήσεις, συμβουλευτείτε τον μεταπωλητή σας ή στείλετε e-mail στη διεύθυνση info@push.eu.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο νάρθηκας επιγονατίδας Push med ασκεί τοπική πίεση στον επιγονατιδικό τένοντα και στρίβει την επιγονατίδα. Αυτό ανακουφίζει την κάψαση του μμηριαίου μύος και μειώνει τη δύσπνη έλξης του μηρού.

Το μαξιλάρια αποτελείται από ελαστικό πολυμερές που είναι συμβατό με το δέρμα. Η συνθετική ενίσχυση του νάρθηκα κάτω από το μαξιλάρια εξασφαλίζει ομοιομορφη διανομή πίεσης.

Η ορθή ανατομική εφαρμογή και το υλικό από το οποίο αποτελείται το μαξιλάρια διατηρούν τον νάρθηκα στη θέση του κατά το περπάτημα. Ο νάρθηκας είναι κατασκευασμένος από Sympress™, ένα υψηλής ποιότητας υλικό που προσφέρει άνεση. Η χρήση μικρών κομμάτιο το εσωτερικό μαλακό και διατηρεί το δέρμα στεγνό.

Ο νάρθηκας επιγονατίδας Push ease εφαρμόζεται εύκολα και μπορεί να πλυθεί άφοβα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Τενοντίτιδα του επιγονατιδικού τένοντα
- Νόσος Osgood-Schlatter (αποφύσισμα του κνημιαίου κερταμώματος)
- Σύνδρομο επιγονατομηριαίου πόνου
- Υπερδάρθρωση/υπερκαλαστικότητα της εγγύς κνημοπροσαρτίας άρθρωσης

Δεν υπάρχουν γνωστές διαταραχές εξάρτησ των οποίων δεν μπορεί ή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται νάρθηκας. Σε περίπτωση καλής κυκλοφορίας του αίματος στα άκρα, η χρήση νάρθηκα μπορεί να προκαλέσει υπερμία. Αποφύγετε να έδεσετε τον νάρθηκα υπερβολικά σφιχτά στην ααχή.

Bolest je vždy varovným znamením. Akoby ste predtým alebo počas nosenia zaťažosti zhoršujú, je vhodné poradiť sa s lekárom alebo terapeutom.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ο νάρθηκας επιγονατίδας διατίθεται σε 1 μέγεθος. Οι διαστάσεις κυμαίνονται από 28 έως 45 εκατοστά.

Βεβαιωθείτε ότι το σημείο πίεσης του νάρθηκα (στο ύψος του λαγονίου) βρίσκεται ακριβώς κάτω από το γόνατο.

Τηνλώστε τον ρυθμιζόμενο μόντα και κλείστε τον.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Για την προώθηση της υγιεινής και τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του νάρθηκας, είναι σημαντικό να πλένετε τα σπρίνκματα τακτικά, ακολουθώντας τις οδηγίες πλύσης.

Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον νάρθηκα για κάποιο διάστημα, συνιστάται να πλύνετε και να στεγνώσετε τον νάρθηκα πριν από την αποθήκευσή του. Πριν από το πλύσιμο, κλείστε τα δεσμάτια από άγκιστρα και θηλές για να προστατέψετε τον νάρθηκα και τα άλλα ρούχα.

Ο νάρθηκας μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασίες έως και 30 °C, σε πρόγραμμα για ευαίσθητα υφάσματα ή στο χέρι. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικούς παράγοντες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο πρόγραμμα πλύσης έπαιτα, απλάστε τον νάρθηκα για να στεγνώσει φυσικά (όχι κοντά σε τηγή θερμότητας ή σε στεγνωτήριο).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Για την ορθή χρήση του νάρθηκα Push ενδέχεται να απαιτείται διάγνωση από ιατρό ή θεραπευτή.
- Οι νάρθηκας Push έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογή σε δέρμα χωρίς βλάβες. Αν το δέρμα φέρει βλάβες, πρέπει να επαυθείτε πρώτα με κατάλληλο υλικό.
- Η βέλπστη λειτουργία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την επιλογή του σωστού μεγέθους. Δοκιμάστε τον νάρθηκα πρώτου τον αγοράσειτε για να ελέγξετε το μέγεθος. Το δοκιμάμενο προσωπικό του μεταπωλητή σας θα σας υποδείξει τον καλύτερο τρόπο για την τοποθέτηση του νάρθηκα Push. Συνιστάται να φυλάξετε τις παρούσες πληροφορίες προϊόντος σε ασφαλή σημείο, ώστε να ανατρέξετε στις οδηγίες τοποθέτησης όπως είναι απαραίτητο.
- Συμβουλευτείτε έναν ειδικό για νάρθηκες αν το προϊόν απαιτεί ατομική προσαρμογή.
- Ελέγχετε τον νάρθηκα Push κάθε φορά πριν από τη χρήση για ενδείξεις φθοράς ή παλαιότητας των εξαρτημάτων ή των ραφών. Η βέλπστη απόδοση του νάρθηκα Push μπορεί να εξασφαλιστεί αν το προϊόν δεν φέρει καμία φθορά.
- Στο πλαίσιο του κανονισμού 2017/745 της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ο χρήστης πρέπει να αναφέρει τυχόν σοβαρά περιστατικά για το προϊόν στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ο χρήστης.

Το σχήμα Push® είναι καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της Nea International bv

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον διανομέα στη χώρα σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.push.eu/distributors

PUSH MED PATELÁRNA ORTÉZA

ÚVOD

Výrobky Push med predstavujú účinné riešenie pri ochoreniach lebo zníženej funkčnosti pohybového ústrojenstva.

Vaša nová patelárna ortéza je výrobkom línie Push med, ktorej charakteristikou je vysoká efektivnosť, pohodlnosť a kvalita. Push med patelárna ortéza zlepšuje funkčnosť a zaisťuje úľavu od bolesti. Zvyšuje tak telesnú silu. Funkcia spočíva v mechanickej podpore, nastaviteľnej kompresii a dobrej fixácii polohy.

Výrobky Push med sú charakteristické svojou pokročilosťou a ich výrobe je venovaná najväčšia starostlivosť. Tieto náibuty zaisťujú ich maximálnu bezpečnosť a väčšiu voľnosť pohybu. Cieľom je zabezpečiť čo najväčšie uspokojenie z ich nosenia.

Pred použitím Push med patelárnej ortézy si dobre preštudujte tieto informácie o výrobku. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obráťte sa prosím na svojho predajcu. Prípadne nám svoj dotaz pošlite e-mailom na adresu info@push.eu.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Push med patelárna ortéza sa psobí na slachu kolena lokálnym tlakom a podporera sa jablko. Tým sa uvoľňuje upon stehenného svala a zmenšuje sa ťažná sila pôsobiaca na predkoleno.

Podložka je vyrobená z elastického polyméru, ktorý koža dobre znáša.

Vďaka anatomickému tvarovaniu a vhodnému materiálu zostáva bandáž na svojom mieste aj počas chôdze.

Ortéza je vyrobená z vysoko kvalitného a pohodlného materiálu Sympress™.

Vďaka použitiu mikrovláknám je materiál zvnútra mäkký na dotyk a udržuje pokožku suchú. Push med patelárna ortéza sa dá bez problémov prať.

INDIKÁCIE

- Tendinitída patelárnej šlachy
- Osgoodova-Schlatterova choroba
- Patelofemorálny syndróm
- Subluxácia/hypermobilita proximálneho tibiofibulárneho kľbu

Nie je známa žiadna porucha, pri ktorej by sa ortéza nedala alebo nesmela nosiť. Pri zlom predlaktia končatín môže ortéza spôsobovať hyperémiu (prekrevenie). Zo začiatku dávajte pozor, aby ste ortézu príliš neufňovali.

Bolest je vždy varovným znamením. Pokiaľ ste predtým alebo počas nosenia zaťažosti zhoršujú, je vhodné poradiť sa s lekárom alebo terapeutom.

VÝBER SPRÁVNEJ VEĽKOSTI / NASADENIE

Patelárna ortéza je dostupná v jednej veľkosti. Rozmer možno prispôbiť v rozmedzí 28 – 45 centimetrov.

Dbajte na to, aby sa tlakový bod ortézy (na úrovni loga) nachádzal priamo pod jablčkom.

Nastaviteľný pás napnite a uzatvorte.

PRANIE

V záujme hygieny a maximálneho predĺženia životnosti bandáže je dôležité bandáž pravidelne prať, pričom postupujte v súlade s pokynmi na pranie.

Ak zamýšľate nejaký čas bandáž nepoužívať, odporúčame, aby ste ju pred odložením vyprali a vysušili. Nie dotahujte ortézu a ostatnej bielizne uzavrite suchý zips. Ortéza sa môže prať pri teplote do 30 °C v režime jemných tkanín alebo v rukách. Nepoužívajte bieliacie prípravky.

Možno použiť jemné odstrodenovanie. Potom nechať ortézu voľne uschnúť na vzduchu (nie v blízkosti tepelného zdroja; nesajte pomocou suchičky).

DOĽEŽITÉ UPOZORNENIE

- Pre správne použitie ortézy Push je vhodné stanovenie diagnózy lekárom alebo terapeutom.
- Bandáže Push boli navrhnuté na nosenie na nepoškodené pokožke. Poškodenú pokožku najprv prekryte vhodným materiálom.
- Optimálne fungovanie môžete dosiahnuť len pri výbere správnej veľkosti. Pred kúpou si bandáž nasadte a skontrolujte jej veľkosť. Odborný personál vášho predajcu vám vysvetlí najlepšiu spôsob, ako si bandáž Push nasadiť. Odporúčame vám, aby ste uchovali tieto informácie o výrobku na bezpečnom mieste. Môžete si káti kedykoľvek pozrieť pokyny na nasadzovanie bandáže.
- Ak si výrobok vyžaduje individuálne prispôsobenie, obráťte sa na odborníka na bandáže.
- Pred každým použitím bandáže Push skontrolujte, či na nej nie sú viditeľné známky opotrebenia alebo zastarania komponentov alebo švov. Optimálne fungovanie bandáže Push je možné garantovať, len ak je výrobok v plnej miere neporušený.
- Sto zmysle nariadenia EÚ 2017/745 o zdravotníckych pomôckach musí používať výrobcom a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používaťeť bydlisko, nahlasiť všetky závažné nehody súvisiace s týmto výrobkom.

Push® e registrovaná známka spoločnosti Nea International bv

Podrobnosti o distribútorovi va vašej krajine zisíte na stránkách www.push.eu/distributors

한국어

PUSH MED 무릎보호대

소개
Push med 제품은 운동기구나 인한 장애 또는 기능 감소를 위한 효과적인 솔루션입니다.
효과가 좋으며, 편안한 사용법, 고품질이 특징인 Push med 제품은 새로운 무릎보호대입니다. Push med 무릎보호대는 신체 기능을 향상시키고 통증을 완화합니다. 또한, 체력을 증가시킵니다. 물리적인 지지력과 조정 가능한 압력, 좋은 자세 유지를 통해 최적의 성능을 제공합니다.

혁신적인 Push med 제품은 최상의 보호 기능을 발휘합니다. 최대한 보호받으며 더 자유롭게 움직일 수 있습니다. 또한, 만족스러운 사용을 보장합니다. Push med 무릎보호대를 사용하기 전에 제품 정보를 주의해서 읽어 보세요.

궁금한 점이 있으시면 판매점에 문의하시거나, info@push.eu로 이메일을 보내주세요.

제품 특성

Push med 무릎보호대는 무릎 힘줄에 국소적인 압력을 가하고 무릎뼈를 보호합니다. 허벅지의 종지근을 완화시키고 허지의 견인력을 줄이도록 돕습니다.

보호대 패드는 피부에 거부감이 없는 탄성 폴리머로 만들었습니다. 패드 아래의 합성 보호 요소는 압력을 균등하게 분산합니다.

인체공학적 구조와 패딩 소재를 적용하여 보형 중 보호대가 정위치를 유지합니다. 보호대는 편안한 고품질 소재 Sympress™으로 제조되었습니다. 국제사를 사용하여 내부가 부드럽으며 피부를 건조하게 유지합니다.

Push med 무릎보호대는 사용이 쉬우며 세탁이 편리합니다.

적응증

- 무릎뼈 힘줄의 건염
- 오즈굿병
- 슬개대퇴 통증 증후군
- 아탈구/근위 경비 관절 과신장

보호대를 착용할 수 없는 것으로 알려진 장애가 없습니다. 사지에 혈액 순환이 좋지 않을 경우, 보호대는 충혈증을 유발할 수 있습니다. 보호대를 처음 착용 시 너무 딱 끼지 않도록 하십시오.

통증이 있다면 주의해서야 합니다. 통증이 지속되거나 악화되면, 주치의나 물리치료사에게 문의하세요.

사용 선택 / 피팅

무릎보호대에는 1가지 사이즈가 있습니다. 사이즈 범위는 28–45 cm입니다. 보호대의 압박 포인트(로그와 반창)가 슬개골 바로 아래에 놓이도록 하십시오.

조정 가능한 고정띠를 조우고 고정합니다.

<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
세탁 지침	
<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
<p>위생을 개선하고 보호대의 수명을 최대화하기 위해 세탁 지침에 따라 보호대를 정기적으로 세탁해야 합니다.</p> <p>한 동안 보호대를 사용하지 않으려면 보관하기 전에 보호대를 세척하고 건조하는 것이 좋습니다.</p> <p>세탁하기 전에 후크와 루프 패스너를 잠금 보호대와 세탁물을 보호하세요. Ortéza sa môže prať pri teplote do 30 °C v režime jemných tkanín alebo v rukách. Nepoužívajte bieliacie prípravky.</p> <p>부드럽게 회전하는 탈수기를 사용할 수 있습니다. 탈수 후 보호대를 빨래줄에 걸어서 육외에서 건조하십시오(드라이어) 또는 드럼 건조기를 사용하지 마십시오.)</p>	
중요 사항	
<ul style="list-style-type: none">Push 보호대를 적합하게 사용하기 위해 의사 또는 물리치료사의 진단이 필요할 수 있습니다. Push 보호대는 부상을 입지 않은 피부에 착용하도록 고안되었습니다. Poškodenú pokožku najprv prekryte vhodným materiálom. Optimálne fungovanie môžete dosiahnuť len pri výbere správnej veľkosti. Pred kúpou si bandáž nasadte a skontrolujte jej veľkosť. Odborný personál vášho predajcu vám vysvetlí najlepšiu spôsob, ako si bandáž Push nasadiť. Odporúčame vám, aby ste uchovali tieto informácie o výrobku na bezpečnom mieste. Môžete si káti kedykoľvek pozrieť pokyny na nasadzovanie bandáže. Ak si výrobok vyžaduje individuálne prispôsobenie, obráťte sa na odborníka na bandáže. Pred každým použitím bandáže Push skontrolujte, či na nej nie sú viditeľné známky opotrebenia alebo zastarania komponentov alebo švov. Optimálne fungovanie bandáže Push je možné garantovať, len ak je výrobok v plnej miere neporušený. Sto zmysle nariadenia EÚ 2017/745 o zdravotníckych pomôckach musí používaťeť výrobcom a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používaťeť bydlisko, nahlasiť všetky závažné nehody súvisiace s týmto výrobkom.	
<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
<p>Declaración de correspondencia</p> <p>POCC RU Д-NL.НА38.В.00133/19 (с 02.04.2019 г. по 01.04.2022 г.) выдана ООО «Сервис Плюс»</p> <p>Push® являются зарегистрированной торговой маркой компании «Неа Интернешнл бивис» (Nea International bv)</p>	
<p>Push®는 Nea International bv의 등록 상표입니다.</p>	

Push®는 Nea International bv의 등록 상표입니다.

Podrobnosti o distribútorovi va vašej krajine zisíte na stránkách www.push.eu/distributors

Для получения подробной информации о дистрибьюторе в вашей стране перейдите по ссылке www.push.eu/distributors

For details of the distributor in your country, we refer to www.push.eu/distributors

Προσκαλούμε τον διανομέα στη χώρα σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.push.eu/distributors

지역별 판매점에 대한 상세 정보는 www.push.eu/distributors를 참조하십시오.

РУССКИЙ

ПРАВИЛА УХОДА

Для того чтобы ортез оставался гигиеничным и чтобы продлить срок его службы, важно регулярно его стирать, соблюдая инструкции по стирке.

Если вы не собираетесь использовать ортез в течение некоторого времени, рекомендуем вымыть и высушить ортез перед хранением. Произудия Push med является инновационной и произведена для Вас с особой тщательностью для максимальной безопасности и комфортного использования.

Перед стиркой застегните застежки «Велкро». Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная стирка при температуре не выше +30°С. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо по адресу sales@nikamed.ru

СОСТАВ

Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала Sympress™. Использование микроволокна обеспечивает ощущение мягкости и поддерживает кожу сухой.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД
Универсальный

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товара не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прерывание использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
Артикул	2.30.2
Производитель	NEA International BV (NEA Интернешнл Бивис) www.push.eu
Импортер	ООО «НИКАМЕД», Россия, 127205, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.
Претензии направлять	Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru .
Товар является медицинским изделием	Отпускается без рецепта
Регистрационное удостоверение № ФС3 2009/04876 от 29.03.2016 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен	
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	Противопоказанно к использованию ортеза Push med Patella Brace на колениую чашечку не выявлено.
Избегайте чрезмерно тугого наложения ортеза Push med Patella Brace на колениую чашечку для предотвращения симптомов нарушения периферического кровообращения в голени и стопе.	
В случае сохранения боли или ухудшения состояния обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.	
ПОДБОР РАЗМЕРА	Ортез Push med Patella Brace на колениую чашечку выпускается в одном универсальном размере, позволяющим с комфортом фиксировать ортез на подколенной области при диапазоне окружности колена от 28 до 45 сантиметров.
Push® являются зарегистрированной торговой маркой компании «Неа Интернешнл бивис» (Nea International bv)	

Push®는 Nea International bv의 등록 상표입니다.

Для получения подробной информации о дистрибьюторе в вашей стране перейдите по ссылке www.push.eu/distributors

РУССКИЙ

Дعامة رضفة الركبة من PUSH MED

Новые ортезы Push med представляют собой медицинскую продукцию, которая характеризуется высоким уровнем эффективности, комфорта и качества. Фиксация сильной ступени и регулируемая компрессия эффективно стабилизируют сустав и снижают болевые ощущения. Продукция Push med является инновационной и произведена для Вас с особой тщательностью для максимальной безопасности и комфортного использования.

Перед использованием ортеза внимательно прочитайте инструкцию. Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо по адресу sales@nikamed.ru

توفر منتجات Push med حلول فعالة من أجل العلاج والوقاية لإصابات الجهاز الحركي. تتميز دعامة الرضفة الجديدة وهي إحدى منتجات Push med بمستوى عال من الفاعلية، والراحة والجودة. تحسن دعامة الرضفة Push med الأداء الوظيفي وتعتمد على تثبيت الأمام. وهذا بدوره يعزز القوة الاربعية للذكي. يُتَمَكَّن الدعم الميكانيكي والضغط القليل للتحديد والاحتفاظ بالموقع الجيد أساساً أذناها.

تتميز منتجات Push med بالابتكار وقد صنعت خصيصاً من أجلك بعناية فائقة. مما يضمن لك أقصى قدر من الأمن ومزيد من حرية الحركة.

لتعزيز استخدام مرضي لك.

نُرجي قراءة معلومات المنتج بعناية قبل استخدام دعامة الرضفة من Push med. نُرجي استشارة البائع؛ إذا اردتلك أي أسئلة، أو إرسال بريد إلكتروني على info@push.eu.

ميزات المنتج

تعتمد دعامة الرضفة من Push med على تطبيق ضغط موضعي على وتر الركبة، كما تدعم رضفة الركبة. مما يقلل من غرغ عضلة الفخذ، ويقلل من قوة الجر على أسفل الساق. تتكون الوسادة من مركب مرن متوافق مع الجلد. تضمنت عناصر الدعم الصناعية تحت الوسادة توزيعاً مناسباً للضغط.

يسهم التركيب التشريحي والمواد المصنوع منها الوسادة في إبقاء الدعامة في مكانها أثناء المشي. صُنعت هذه الدعامة من مادة Sympress™، وهي مادة مريرة وعالية الجودة. تُستخدَم الألياف مجهرية، مما تمنحك الشعور بالدعم في الداخل، وتحافظ على جفاف الجلد.

تتسم دعامة الرضفة من Push med بسهولة الاستخدام، كما يمكن غسلها بدون أي مشاكل.
دواعي الاستعمال:
تستخدم في الحالات الآتية

• التهاب وتر الرضفة
• داء أوزغود-شلاتر (التنكس العظمي العضروفي لأحدوية الظنوب)
• متلازمة الألم الرضفي الفخذي
• الخلع/فرط حركة المفصل الظنوبي الشظوي الذاتي (القريب)

لا توجد اعتلالات معروفة قد تتعارض مع ارتدائك للدعامة. قد تسبب الدعامة فرط الدم في حالة ضعف الدورة الدموية في الأطراف. تجنب إغلائ الدعامة بإحكام شديد في البداية.

يُعد الألم عادة إشارة على التحذير. يُستحسن استشارة الطبيب أو المعالج؛ إذا استمر الألم أو تدهورت الشكوى.

• Optimalное функционирование может быть достигнуто только посредством выбора правильного размера. Примерьте изделие перед покупкой, чтобы проверить его размер. Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила надевания ортеза. Мы рекомендуем сохранить эту информацию об изделии в надежном месте, чтобы иметь возможность обратиться к инструкции по подгонке изделий в случае необходимости.

• Обратитесь к специалистам, если продукт требует индивидуальной подгонки.

• Функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза Push med Patella Brace или при раскождении швов. Не забывайте проверять ортез Push med Patella Brace на наличие признаков повреждения перед каждым использованием.

• В рамках постановления ЕС 2017/745 о медицинских изделиях пользователь должен сообщить о любом серьезном инциденте, связанном с изделием, производителю и компетентному государственному органу, в котором зарегистрирован производитель.

- Оптимальное функционирование может быть достигнуто только посредством выбора правильного размера. Примерьте изделие перед покупкой, чтобы проверить его размер. Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила надевания ортеза. Мы рекомендуем сохранить эту информацию об изделии в надежном месте, чтобы иметь возможность обратиться к инструкции по подгонке изделий в случае необходимости.
- Обратитесь к специалистам, если продукт требует индивидуальной подгонки.
- Функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза Push med Patella Brace или при раскождении швов. Не забывайте проверять ортез Push med Patella Brace на наличие признаков повреждения перед каждым использованием.
- В рамках постановления ЕС 2017/745 о медицинских изделиях пользователь должен сообщить о любом серьезном инциденте, связанном с изделием, производителю и компетентному государственному органу, в котором зарегистрирован производитель.

СВОЙСТВА ТОВАРА/ЗАБЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Ортез Push med Patella Brace на колениую чашечку обеспечивает фиксацию собственной связки надколенной (коленной чашечки) и поддерживает колениую чашечку. Это позволяет перераспределять нагрузку и существенно снизить интенсивность боли. Полужесткий пелот ортеза выполнен из эластичного полимера. Анатомическая форма позволяет ортезу оставаться на месте при движениях колениого сустава. Высококачественный комфортный материал Sympress™ обеспечивает оптимальный влаго-воздухообмен (система тер

ОРТЕЗ ПАТЕЛЯРНИЙ

PUSH MED PATELLA BRACE

АРТИКУЛ: 2.30.2

ВСТУП

Ортез серії Мед торговельної марки Push – оптимальне рішення у випадку порушення або зникеного функціонування опорно-рухового апарата.

Ваш новий ортез Push Med характеризується високим рівнем ефективності, комфорту та якості. Ортез пателярний Push med Patella Brace покращує функціонування та забезпечує полегшення болючих відчуттів. Це збільшує фізичну силу. Механічна підтримка, компресія, що регулюється, та збереження належного положення є основою його характеристики.

Продукція Push Med є інноваційною та вироблена для Вас із особливу ретельністю для максимальної безпеки та більшої свободи руху. Приймають отриманню задоволення від користування.

Перед застосуванням ортеза уважно ознайомтеся з інструкцією.

Якщо Ви маєте будь-які питання, будь ласка, зверніться за консультацією до дистриб'ютора або надішліть електронний лист на адресу alkom@alkom.ua чи info@push.eu.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

Ортез пателярний ортез Push med Patella Brace створює локальний тиск на підколінне суглобиля та підтримує коліну чашечку. Це полегшує вставлення м'язів стегна та зменшує тяглову силу на голміку.

Подушка складається з еластичного полімеру сумісного зі шкірою. Синтетичний фіксатор під подушкою забезпечує рівномірний розподіл тиску.

Правильна анатомічна конструкція і матеріал подушки сприяють фіксації ортезу під час ходьби. Ортез виконаний з високоякісного зручного матеріалу Sympress™. Використання мікробібри дозволяє відчутти м'язість усередині ортезу і зберегти шкіру сухою.

Ортез пателярний Push med Patella Brace легко надається та розрахований на регулярний гігієнічний догляд (прання).

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Запалення сухожильків коліної чашечки;
- Хвороба Осгуда-Шляттера;
- Пателомофальний болючий синдром;
- Пателових/гіперрухливість проксимального кінця тбіо-фібулярного суглоба.

Інформація про такі порушення, коли ортез не можна або не варто носити, відсутня. У разі порушень циркуляції крові у кінцівках бандаж може викликати гіперемію. Уникайте надмірно тугого накладання ортеза на початку використання.

Біль завжди є попереджувальним знаком. Якщо біль не зникає або скарги посилюються, зверніться за консультацією до Вашого лікаря або терапевта.

Artikul	2.30.2
Виробник	Nea International bv (Неа Інтернешнл Бів) www.push.eu
Імпортер	ТОВ «Торговий дім Алком» Україна, 02217 Київ Вул Т. Драйзера, 8
Претензії приймає уповноважений представник в Україні	ТОВ «Торговий дім Алком» Україна, 02217 м. Київ, Вул Т. Драйзера, 8 Телефон: +38 (044) 548-35-33

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТА КОНСУЛЬТАЦІЯ НАДЯГАННЯ
Ортез пателярний випускається в 1 розмірі. Діапазон розміру коливається від 28 до 45 сантиметрів.

Переконайтеся, що точка тиску ортезу (на рівні логотипу) знаходиться безпосередньо під коліною чашечкою. Натягніть регульований ремінець і застебніть його.

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ



Для підтримання гігієни та забезпечення максимального строку експлуатації бандажу, важливо прати його на регулярній основі, дотримуючись інструкцій щодо прання.

Якщо ви маєте намір не використовувати бандаж протягом певного часу, рекомендується, щоб ви вимили та висушили його перед зберіганням.

Перед пранням застібніть застібки-липички «Велкро», щоб захистити ортез та інші речі, щоб неуртуса разом із ним. Ортез можна прати у пральній машині в щадному (делікатному) режимі або руками за температури не вище +30 °C. Не застосовуйте хлорвмісні миючі та відбілюючі засоби.

Можна використовувати цикл віджиму для делікатних речей: після цього ортез висушують для висушування на відкритому повітрі (**подалі від** джерела нагрівання та не у сушарці).

Push® є зареєстрованою торговою маркою компанії «Неа Інтернешнл Бів» (Nea International bv)

За додатковою інформацією про дистрибутора у Вашій країні звертайтеся за посиланням: www.push.eu/distributors

PUSH MED 髌骨支撑护具

简介

Push med 产品为运动器损伤或功能减退提供有效的解决方案。

Push med 髌骨支撑护具是一款全新的产品，具有高效、舒适和高品质的特点。Push med 髌骨支撑护具可改善功能并缓解疼痛。可以增加身体强度。机械支撑、可调节压力和良好的位置保持能力构成了其性能的基础。

Push med 产品具有创新性，专为您精心打造。它能够最大程度地确保安全性和行动自由度，提升使用满意度。

在使用 Push med 髌骨支撑护具之前，请仔细阅读产品信息。如果您有任何疑问,请咨询您的经销商或者发送邮件至 info@push.eu。

产品特点

Push med 髌骨支撑护具通过在膝盖肌腱上施加局部压力并支撑髌骨，减轻大腿肌肉的插入并减少小腿上的牵引力。

护垫由具有皮肤亲和性的弹性聚合物制成。衬垫下方的合成支撑部件可确保均匀的压力分布。

衬垫的适当解剖学应用以及材料有助于支撑护具在行走期间保持在适当位置。该支撑护具由 Sympress™（一种高品质的舒适材料）制成。微纤维的使用使其内部感觉柔和并能使皮肤保持干燥。

Push med 髌骨支撑护具易于使用，可清洗且不会出现任何问题。

适应症

- 髌骨肌腱炎
- 胫骨粗隆骨软骨病
- 髌股疼痛综合征
- 半脱位/过度活动近端胫膝关节

未发现不适合使用支撑护具的病症。在四肢血液循环不良的情况下，支撑护具可能导致充血。避免让支撑护具从一开始贴附过紧。

疼痛始终是警示信号。如果疼痛持续或症状恶化，建议咨询您的医生或治疗师。

确定尺寸 / 贴合度

髌骨支撑护具仅有 1 个尺寸选项。测量范围从 28 到 45 厘米。确保支撑护具的压力点（与 Logo 处同一高度）位于髌骨下方。系紧松紧带并将其稳固。

清洗说明



为了确保护具的洁净，以及最大化延长护具的使用寿命，按照以下 清洗说明定期清洗护具非常重要。

如您打算将支撑护具闲置一段时间，建议在存放支撑护具之前清洗并干燥。

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger la bande patellaire et l'autre lige.

La bande patellaire peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30°C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher la bande patellaire à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge).

重要说明

- 正确使用 Push 支撑护具可能需要医生或治疗师的诊断意见。
- Push 支撑护具设计用于穿戴在未受损的皮肤上。如需在受损的皮肤上使用，必须先覆盖一层合适的材料。
- 只有选择合适的尺寸才能实现最佳功能。购买之前，请验配支撑护具以检查其尺寸是否合适。您的经销商的专业技术人员将说明验配 Push 支撑护具的最佳方法。我们建议您将本产品信息保存在安全的地方，以便在需要时查阅验配说明。
- 如果产品需要适应个体需要，请咨询支撑护具专家。
- 每次使用前检查您的 Push 支撑护具是否有磨损迹象，或部件或接缝老化。只有在产品完好无损的情况下，才能保证 Push 支撑护具的最佳性能。
- 在欧盟医疗器械法规 2017/745 的框架内，用户必须向制造商和用户所在的成员国的主管当局报告涉及产品的任何严重事故。

Push® 是 Nea International bv 的注册商标

BANDE PATELLAIRE PUSH MED

INTRODUCTION

Les produits Push med fournissent des solutions efficaces en cas de trouble ou de fonctionnement réduit de l'appareil locomoteur.

Votre nouvelle bande patellaire est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. La bande patellaire Push med assure une meilleure fonctionnalité et soulage la douleur. La résistance physique en est de ce fait augmentée. Un support mécanique, une pression réglable et un bon maintien de la position constituent la base de son fonctionnement.

Les produits Push med sont innovateurs et fabriqués pour avec un grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'objectif est en effet d'atteindre la satisfaction de l'utilisateur.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser la bande patellaire Push med. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

La bande patellaire Push med applique une pression locale sur le tendon rotulien et soutient la rotule. Elle soulage l'insertion du muscle de la cuisse et réduit la force de traction sur la jambe.

Le rembourrage est polymère élastique compatible avec la peau. L'élément de soutien synthétique sous le rembourrage assure une répartition égale de la pression.

Un ajustement anatomique approprié, associé à la matière du rembourrage, permet à la bande de rester en place lorsque vous marchez. L'orthèse est faite en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibrres rend l'intérieur doux et maintient la peau sèche.

La bande patellaire Push med est facile à appliquer et se lave sans aucun problème.

INDICATIONS

- Tendinite du tendon rotulien
- Maladie d'Osgood-Schlatter
- Syndrome de douleur fémoro-patellaire
- Subluxation / hypermobilité de l'articulation tibo-fibulaire proximale

Il n'existe aucune affection connue en raison de laquelle l'orthèse ne doit pas ou ne peut pas être utilisée. En cas de mauvaise circulation sanguine dans les membres, une orthèse peut provoquer une hyperémie. Ne serrez pas excessivement l'orthèse, au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

La bande patellaire est disponible en une seule taille. Les mesures varient de 28 à 45 centimètres.

Assurez-vous que le point de pression de la bande patellaire (au niveau du logo) est situé directement sous la rotule.

Tendez la bande réglable et fermez-la.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Pour assurer l'hygiène et prolonger la durée de vie de la bande patellaire, il importe de la laver régulièrement en respectant les instructions de lavage.

Si la bande patellaire n'est pas utilisée durant une période prolongée, il est conseillé de la laver et de la faire sécher avant de la ranger.

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger la bande patellaire et l'autre lige.

La bande patellaire peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30°C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher la bande patellaire à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge).

ATTENTION

- L'utilisation appropriée de la bande patellaire Push peut nécessiter le diagnostic d'un docteur ou d'un thérapeute.
- Les bande patellaire Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille de bande patellaire adéquate. Essayez donc la bande patellaire avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre bande patellaire Push. Nous vous conseillons de conserver ces modalités et/ou de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de la bande patellaire à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Contrôlez votre bande patellaire Push avant chaque utilisation, pour vérifier qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de vieillissement de ses éléments ou de ses coutures. Votre bande patellaire Push ne peut fonctionner de manière optimale que s'il est entièrement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

Pour plus de détails concernant votre distributeur national, consultez l'adresse www.push.eu/distributors

ROMÂNĂ

ORTEZĂ PATELARĂ PUSH MED

INTRODUCERE

Produsele Push med oferă soluții eficiente în cazul unei afecțiuni sau a funcționării reduse a aparatului locomotor.

Noua dumneavoastră orteză patelară este un produs Push med, caracterizat printr-un nivel crescut de eficacitate, confort și calitate. Orteza patelară Push med îmbunătățește funcționarea și conturează la ameliorarea durerii. Această creștere fizică și susținerea mecanică, presiunea regulabilă și menținerea poziției cospunzătoare reprezintă baza performanțelor sale.

Produsele Push med sunt inovatoare și produse cu multă atenție pentru dumneavoastră. Acest lucru asigură o siguranță maximă și o libertate mai mare a mișcărilor. Pentru a promova satisfacția în utilizare.

Citiți cu atenție informațiile referitoare la produs înainte de a utiliza orteza patelară Push med. Dacă aveți întrebări, consultați revanzatorul sau trimiteți un e-mail la info@push.eu.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Orteza patelară Push med aplică presiune locală pe tendonul genunchiului și susține rotula. Aceasta reduce presiunea din zona de inserție a mușchiului coapsei și reduce forța de tracțiune de pe gambă.

Căptușeala este realizată dintr-un polimer compatibil cu pielea și elastic. Elementul sintetic de fixare de sub căptușeală asigură o distribuție uniformă a presiunii.

Forma anatomică adecvată și materialul căptușit contribuie la fixarea ortezei în poziție în timpul mersului. Orteza este realizată din Sympress™, un material confortabil, de calitate. Utilizarea microfibrelor face ca interiorul să fie moale și să mențină pielea uscată.

Orteza patelară Push med este ușor de aplicat și poate fi spălată fără probleme.

INDICAȚII

- Gimelės sausgyslės uždegimas
- Osgudo-Šlatterio liga
- Patelofemoralinio sąjūgio sindromas
- Sindrom dureros femuro-patelar
- Subluxacija / hipermobilitata artikuliečiai tibiofibulare proximale

Nu se cunosc afecțiuni în care orteza nu poate sau nu trebuie să fie purtată. În cazul unei circulații slabe a sângelui în membre, o orteză poate provoca hiperemie. Evitați aplicarea peart strânsă a ortezii la început.

Durerea este întotdeauna un avertisment. Dacă durerea persistă sau problema se agravează, se recomandă să vă adresați medicului sau terapeutului.


STABILIREA DIMENSIUNII / PROBAREA

Orteza patelară este disponibilă în 1 mărime. Dimensiunile variază de la 28 la 45 de centimetri.

Asigurați-vă că punctul de presiune al ortezei (la nivelul logo-ului) este așezat direct sub rotulă.

Strângeți chinga regulabilă și închideți-o.

INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

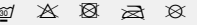

Pentru a promova igiena și a maximiza durata de viață a ortezei, este important să spălați orteza regulat, respectând instrucțiunile de spălare.

Dacă intenționați să nu utilizați orteza pentru o perioadă de timp, se recomandă să o spălați și să o uscați înainte de depozitare.

Înainte de spălare, închideți sistemele de prindere cu arici pentru a proteja orteza și celelalte rufe.

Orteza poate fi spălată la temperaturi de pana la 30 °C, cu un program pentru țesături delicate sau de mână. Nu utilizați înalbitori.

Se poate folosi un ciclu ușor de centrifugare: după aceea, atârnați orteza pentru a se usca în aer liber (nu în apropierea unei surse de căldură sau într-un uscător de rufe).

IMPORTANT

- Utilizarea corectă a ortezei Push poate necesita diagnosticarea de către un medic sau un terapeut.
- Ortezele Push sunt concepute pentru a fi purtate pe pielea fără leziuni. Suprafețele de piele cu leziuni trebuie acoperite mai întâi cu un material corespunzător.
- Savo funcțiaaj ivaras gali atikliti tik pasininku tikmoju dąjdy. Prieš įsigyjimą, patikrinkite ortezę, kad patikintumėte dydį. Profesionalus tikiąkarpėjas paaikšins, kaip geriausia užsidėti „Push“ įvara. Rekomenduojame įsi informaciją apie gaminių laikyti saugioje vietoje, kad prireikus galėtumėte peržiūrėti įvaro uždėjimo nuorodymus.
- Jei gaminį reikia pritaikyti individualiai, pasitarkite su įvarų specialistu.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar „Push“ įvaras nėra nusidėvėjęs, ar nenudilę jo komponentai ir siūlės. „Push“ įvaras tinkamai veikti gali tik tuo atveju, jei būtų tinkamų.
- Pagal ES reglamento 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus apie visus su gaminiu susijusius rimtus incidentus naudotojas privalo pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje vykdo veiklą, kompetentingai institucijai.

Push® este marcă comercială înregistrată a Nea International bv

Pentru detalii referitoare la distribuitorul comercial din țara dumneavoastră, consultați www.push.eu/distributors

LIETUVIŲ

„PUSH MED“ GIRNELĖS ĮTVARAS

ĮVADAS

„Push med“ gaminiai yra puikus sprendimas atsiradus lokomotorinės sistemos sutrikimui arba supratęjus jos funkcionavimui.

Naujasis jūsų gimelės įvaras yra „Push med“ gaminy s, pasižymintis dideliu veiksmingumu, patogumu ir kokybe. „Push med“ gimelės įvaras didina funkcionalumą ir mažina skausmą. Šie gaminiai padidina fizinę jėgą. Jie efektyvus todėl, kad suteikia mechaninę atramą, leidžia reguliuoti spaudimą ir puikiai išlaiko padėtį.

„Push med“ gaminiai yra novatoriški ir pagaminti itin kruopščiai. Jie užtikrina didžiausią apsaugą ir judesį laisvę. Juos naudoti yra malonu.

Citiți cu atenție informațiile referitoare la produs înainte de a utiliza orteza patelară Push med. Dacă aveți întrebări, consultați revanzatorul sau trimiteți un e-mail la info@push.eu.

GAMINIO SAVYBĖS

„Push med“ gimelės įvaras prispaudžia kelio sausgyslę ir prilaiko gimelę. Tai sumažina raumenų įtempimą ir apatinės kojos dalies traukimą jėgą.

Pamušus sudaro tinkamas liestis su oda elastingis polimeras. Po kamušų esantis sintetinis sutvirtinimo elementas tolygiai paskirsto spaudimą. Vaikštinti įvaras išsilaiko savo vietoje dėl tinkamo anatominio pritaikymo ir kamušo medžiagos. Įvaras pagamintas iš „Sympress™“ – aukštos kokybės patogios medžiagos. Dėl mikropluošto vidinė dalis yra minkšta ir neleidžia odai prakaituoti.

„Push med“ gimelės įvarą lengva uždėti ir patogų skaltbi.

INDIKACIJOS

- Gimelės sausgyslės uždegimas
- Osgudo-Šlatterio liga
- Patelofemoralinis sąjūgio sindromas
- Proksimalinio šėivikaulio sąnario subluxacija arba hipermobilumas

Žinomi ligų, kurioms serganti įvaro nebūti galima arba nebūti rekomenduojama naudoti, nėra. Sutrikus galūnių kraujotakai, įvaras gali sukelti hiperemiją. Įvaro iš pradžių per stipriai neužverkite.

Skausmas visada signalizuoja pavojų. Jei skausmas nepraeina arba simptomai stiprėja, rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba terapeutu.

DYDŽIO NUSTATYMAS IR UŽDĖJIMAS

Gimelės įvaras yra vieno dydžio. Jo matmenys – nuo 28 iki 45 cm. Patikrinkite, ar įvaro spaudžiamasis skausmas (ties logotipu) yra iškart po kelio gimelės.

Įtempkite reguliuojamąją juostą ir prisekite.

SKALBIMO INSTRUKCIJOS



Stiekiai patalkyti higienę ir maksimaliai padidinti įvaro tamavimo laiką, svarbu reguliariai plauti įvarą, laikantis skalbimo instrukcijų.

Jei ketinate kurį laiką nenaudoti įvaro, rekomenduojama prieš laikant jį nuplauti ir nusausinti.

Prieš skalbdami, įvarą ir kitus skalbinius apsaugokite užlenkdamai kabiluką ir kilpas.

Įvarą galima skalbti iki 30 °C temperatūros vandenyje skalbyklėje, nustačius jautriąjį audinių programą, arba rankomis. Nenaudokite jokių balinimo priemonių.

Galima įjungti švelnią gręžimo programą. Po to įvarą padžiaukite, kad išdžiūtų atvirame ore (ne greta šildymo šaltinio ar elektrinėje džiovyklyje).

SVARBU

- Norint „Push“ įvaraų naudoti tinkamai, gali reikėti gydytojo arba terapeuto diagnozės.
- „Push“ įvairai skirti dėti ant nepažeistos odos. Jei oda pažeista, jų pirmiausia reikia uždengti tinkama medžiaga.
- Savo funkciją įvaras gali atlikti tik pasininku tikmoju dąjdy. Prieš įsigyjimą, patikrinkite ortezę, kad patikintumėte dydį. Profesionalus tikiąkarpėjas paaikšins, kaip geriausia užsidėti „Push“ įvara. Rekomenduojame įsi informaciją apie gaminių laikyti saugioje vietoje, kad prireikus galėtumėte peržiūrėti įvaro uždėjimo nuorodymus.
- Jei gaminį reikia pritaikyti individualiai, pasitarkite su įvarų specialistu.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar „Push“ įvaras nėra nusidėvėjęs, ar nenudilę jo komponentai ir siūlės. „Push“ įvaras tinkamai veikti gali tik tuo atveju, jei būtų tinkamų.
- Pagal ES reglamento 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus apie visus su gaminiu susijusius rimtus incidentus naudotojas privalo pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje vykdo veiklą, kompetentingai institucijai.

„Push®“ yra registruotas „Nea International bv“ prekės ženklas

Informacijos apie jūsų šalįje esančius platintojus ieškokite adresu www.push.eu/distributors

PUSH MED CEĻA KAULA BALSTS

IEVADS

Push med produkti piedāvā efektīvus risinājumus balsta un kustību orgānu sistēmas slimības vai samazinātu funkcionālo spēju gadījumā.

Jūsu jaunais ceļa kaula balsts ir Push med gaminys, pasīzymintis dideli efektiivitāti, komfortu un kvalitāti. Push med ceļa kaula balsts uzlabo funkcionālās spējas un palīdz samazināt sāpes. Tie arī palielina fizisko spēju. Produktu iedarbības pamatā ir mehāniskais atbalsts, regulējams spiediens un labas pozīcijas saglabāšanās vilces spēks.