



**1.**


**A.**

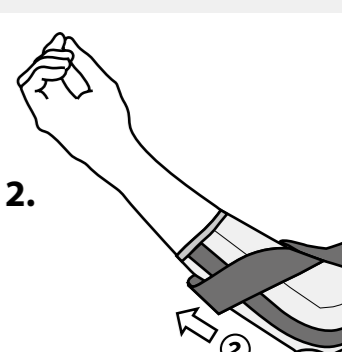

**B.**

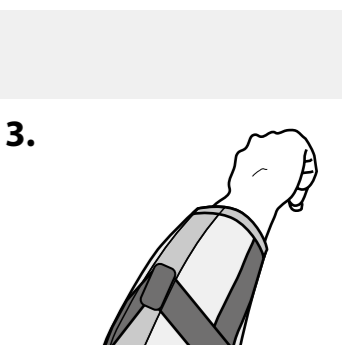

**3.**

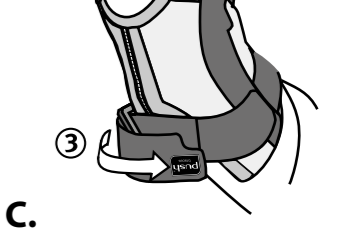

**C.**

| Material composition  |     |
|-----------------------|-----|
| Steel                 | 33% |
| Polyamide             | 27% |
| Polyester             | 21% |
| Polyvinylchloride     | 7%  |
| Others                | 12% |
| Latex free            |     |
| <b>push</b><br>braces |     |

Το σημάδι Push® είναι καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της Nea International bv

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΑ PUSH MED

### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα προϊόντα Push med παρέχουν αποτελεσματικές λύσεις για τη θεραπεία και την πρόληψη τραυματισμών στο κινητικό σύστημα. Ο νέος σας νάρθηκας αγκώνα είναι προϊόν Push med και προσφέρει αποτελεσματικότητα, άνεση και όραση ποιότητα. Ο νάρθηκας αγκώνα Push med περιρρίζει το τένινοα και προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο. Αυτό αυξάνει τη φυσική δύναμη. Η μηχανική υποστήριξη, η ρυθμιζόμενη πίεση και η διατήρηση καλής θέσης αποσπάζει τη βάση της απόδοσης, του πόνου. Τα προϊόντα Push med είναι καινοτόμα και κατασκευάζονται για εσάς με εξαιρετική φρονιδή. Αυτό εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια και μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων. Για την προώθηση της καινοτομίας από τη χρήση του προϊόντος.

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση του νάρθηκα αγκώνα Push med. Εάν έχετε ερωτήσεις, συμβουλευτείτε τον ματαπληθή σας ή στείλετε e-mail στη διεύθυνση info@push.eu.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο νάρθηκας αγκώνα Push med προσφέρει συνεχώς ρυθμιζόμενο περιορισμό επέκτασης για την άρθρωση του αγκώνα. Αυτό αποτρέπει την υπερέκταση. Ο αποτομένος βαθμός περιορισμού μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα με το ένα χέρι. Οι δύο ενσωμαωσείς παράχουν στήριξη και κατεύθυνση για τις κινήσεις κάμψης και επέκτασης. Οι ετοινοαζόμενες ζώνες άνεσης από υλικό με ενίσχυση έχουν δημιουργηθεί για τις ευαίσθητες περιοχές του αγκώνα. Η ορθή ανατομική εφαρμογή, το υλικό και η εφαρμογική ολκόνος διατηρούν τον νάρθηκα στη θέση του κατά την εκτέλεση κινήσεων.

Ο νάρθηκας είναι κατασκευασμένος από Sympress™, ένα υψηλής ποιότητας υλικό που προσφέρει άνεση. Η χρήση μικρών κομματιών το εσωτερικό μαλακό και διατηρεί το δέρμα στεγνό. Ο νάρθηκας αγκώνα Push med μπορεί να πλυθεί κανονικά.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Ενοχλήσεις μετά από τραύμα λόγω υπερέκτασης
- Αρθρίτιδα
- Κύστη ωλεκράνου
- Προοτρίπη (impingement)

Δεν υπάρχουν γνωστές διαταραχές εξάρτας των οποίων δεν μπορεί ή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται νάρθηκας. Σε περίπτωση κακής κυκλοφορίας του αίματος στα άκρα, η χρήση νάρθηκα μπορεί να προκαλέσει υπεραιμία. Αποφύγετε να δέσετε τον νάρθηκα υπερβολικά σφικτά στην αρχή.

Ο πόνος είναι πάντα ένδειξη προειδοποίησης. Εάν ο πόνος παραμένει ή η ενόχληση επιδεινώνεται, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον ιατρό ή τον θεραπευτή σας.

### ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ο νάρθηκας αγκώνα διατίθεται σε 5 μεγέθη. Ισωςτέ τον αγκώνα. Μετρήστε την περιμετρο του αγκώνα, όπως φαίνεται στην εικόνα της συσκευασίας. Ο πίνακας της συσκευασίας δείχνει το σωστό μέγεθος νάρθηκα για τον αγκώνα σας.

1. Λάστε άα το δείξιμάα από άγκίστροα και θήλιές. Κρατήστε το εσωτερικό του χεριού σας προς το μέρος σας ενώ ο αγκώνας σας λυγίζει ελαφρώς. Χρησιμοποιήστε τις άκρες της ενίσχυσης για να τοποθετήσετε τον νάρθηκα στον βραχίονά σας.

Πραγματοποίηση ενάλληγη μεταξύ της αριστεράς και της δεξιές άκρας της ενίσχυσης, για να βεβαιωθείτε ότι ο νάρθηκας εφαρμόζει ασυμμετρικά στον βραχίονα.

Ο νάρθηκας έχει τοποθετηθεί σωστά εάν αισθάνεστε το προέχον τιμήμα του αγκώνα στο άνοιγμα.

- Χρησιμοποιήστε τους μη ελαστικούς μόντες για να ρυθμίσετε τον αποτομένο περιορισμό τενώνιστος. Η κίνηση τενώνιστος του αγκώνα περιορίζεται περισσότερο καθώς το δέσιμο από άγκίστροα και θήλιές πληθαίνει προς το χέρι.
- Κλείστε τον νάρθηκα σωστά στο πίσω μέρος του άνω βραχίονα.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Για την προώθηση της υγιεινής και τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του νάρθηκα, είναι σημαντικό να πλένετε τα στήριγματα τακτικά, ακολουθώντας τις οδηγίες πλύσης. Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον νάρθηκα για κάποιο διάστημα, συνιστάται να πλένετε και να στεγνώσετε τον νάρθηκα πριν από την αποθήκευσή του. Πριν από το πλύσιμο, κλείστε τα δείξιμάα από άγκίστροα και θήλιές για να προστατεύσετε τον νάρθηκα και τα άλλα ρούχα.

Ο νάρθηκας μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασίες έως και 30° C, σε πρόγραμμα για ευαίσθητα υφάσματα ή στο χέρι. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικούς παράγοντες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ήπιο πρόγραμμα πλύσης, έπειτα, σπλάστε τον νάρθηκα για να στεγνώσει φυσικά (όχι κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε στεγνωτήριο).

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Για την ορθή χρήση του νάρθηκα Push ενδείχεται να απαιτείται διάγνωση από ιατρό ή θεραπευτή.
- Οι νάρθηκας Push έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογή σε δέρμα χωρίς βλάβες. Αν το δέρμα φέρει βλάβες, πρέπει να κολυβηθεί πρώτα με καθαρό ήπιο υλικό. Η βλάβη μπορεί να επιταχύνει το πάθος. Η βλάβη από την χρήση του νάρθηκα Push μπορεί να είναι ευνομημένη μόνο εάν το προϊόν είναι άθικτο.
- Στο πλαίσιο του κανονισμού 2017/745 της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ο χρήστης πρέπει να αναφέρει τυχόν σοβαρά κρατήματα για το προϊόν στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ο χρήστης.

## SLOVENSKY

## PUSH MED ORTÉZA LAKŤA

### ÚVOD

Výrobky Push med predstavujú účinné riešenie pri liečbe a prevencii úrazov pohybového ústrojenstva.

Vaša nová ortéza lakťa je výrobkom línie Push med, ktorej charakteristikou je vysoká efektívnosť, pohodlnosť a kvalita. Push med ortéza lakťa obmedzuje úroveň napätie a zaisťuje ťažavú podporu a dobrej fixácii polohu.

Výrobky Push med sú charakteristické svojou pokrokovosťou a ich výrobc je venovaná najväčšia starostlivosť. Tieto atribúty zaisťujú ich maximálnu bezpečnosť a väčšiu voľnosť pohybu. Cieľom je zabezpečiť čo najväčšie uspokojenie z ich nosenia.

Pred použitím Push med ortézy lakťa si dobre preštudujte tieto informácie o výrobku.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obráťte sa, prosím, na svojho predajcu. Prípadne nám svoje otázky pošlite e-mailom na adresu info@push.eu.

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Vaša Push med ortéza lakťa zabezpečuje plynulú nastaviteľnú obmedzenie extenzie laktového klbu. Bráni tak nadmernému napätiu. Požadovaný stupeň obmedzenia extenzie je možné nastaviť jednoducho a pomocou jednej ruky. Podpora a smer flexných a extenzných pohybov je určovaný pomocou dvoch vystužených dielov. Okolo zraniteľných oblastí lakťa boli vytvorené tzv. komfortné zóny z vyhladeného materiálu. Vďaka anatomickému tvarovaniu, materiál a použité silikónu zostáva bezpečná na svojom mieste aj počas pohybu. Ortéza je vyrobená z vysoko kvalitného a pohodlného materiálu Sympress™. Vďaka použitiým mikrovláknkam je materiál zvrútna mäkký na dotyk a udržuje pokožku suchú. Push med ortéza lakťa sa dá bez problémov prát.

### INDIKÁCIE

- Tažkosť po poranení v dôsledku hyperextenzie
- Artróza
- Burzitita
- Impingement syndróm (vrodený, pri preťažení, po úraze)

Nie je známa žiadna porucha, pri ktorej by sa ortéza nedala alebo nemela nosiť. Pri zlom prekrvovaní tkanív môže ortéza spôsobovať hyperémiu (prekrvenie). Za začiatku dávajte ortézu, aby ste ortézu prišliľ neuhafovali.

Bolest je vždy varovným znamením. Pokiaľ bolesť pretrváva alebo sa ťažkosť zhoršujú, je vhodné poradiť sa s lekárom alebo terapeutom.

### VÝBER SPRÁVNEJ VEĽKOSTI/NASADENIE

Ortéza lakťa sa vyrába v 5 veľkostiach. Natiahnite lakť. Podľa obrázku na obale si odmerajte obvod lakťa. Správnu veľkosť ortézy podľa obvodu lakťa určíte podľa tabuľky na obale.

A. Uvoľnite všetky pásky so suchým zipom. Mierne ohnite lakť a držte ruku diaľou smerom ku sebe.

Bandáž natiahnite pomocou vystužených dielov.

Striedajte pri tom ľavý a pravý, aby sa bola bandáž umiestnená na rovnake symetričny.

Ortéza je umiestnená správne, akonáhle zapadne vyčnievajúca časť lakťa do otvoru v rukáv.

Po zdvihnutí končatiny uvidíte zips. Uistite sa, že sa zips nedotyka kože. Zapnite ho.

B. S pomocou neelastických pásov nastavte požadovaný stupeň obmedzenia extenzie. Stupeň natiahnutia svaly je obmedzený tým viac, čím je každý zips zapnutý bližšie k ruke.

C. Neelastický pás zapnite na zadnej strane ramena.

### POKyny Na PRANIE

V záujme hygieny a maximálneho predĺženia životnosti bandáže je dôležité bandáž pravidelne prať, pričom postupujte v súlade s pokynmi na pranie.

AK zmyšľajte nejaký čas bandáž nepoužívať, odporúčame, aby ste ju pred odloženíím vypriali a vysušili.

Pred praním na ochranu ortézy a ostatnej bielizne uzavrite suchý zips. Ortéza sa môže prať pri teplote do 30° C v režime jemnej tkanín alebo v rukách. Nepoužívajte bieliacie prípravky. Možno použiť jemné odstraďovanie. Potom nechajte ortézu voľne uschnúť na vzduchu (nie v blízkosti tepelného zdroja; nesušte pomocou sušičky).

### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

- Na správne použitie ortézy Push med je vhodné stanovenie diagnózy lekárom alebo terapeutom.

- Bandáže Push boli navrhnuté na nosenie na nepoškodenej pokožke. Poškodeni pokožku najprv prekrte vhodným materiálom. Optimálne fungovanie môžete dosiahnuť len pri výbere správnej veľkosti. Pred kúpu si bandáž nasadte a skontrolujte jej veľkosť. Odborný personál predajcu vám vysvetlí najlepší spôsob. Ak si bandáž Push nasadíť. Odporúčame vám, aby ste uvažovali tieto informácie o výrobku na bezpečnom mieste. Môžete si tak kedykoľvek pozrieť pokyny na nasadzovanie bandáže.
- Pokiaľ výrobok vyžaduje individuálnu úpravu, poraďte sa s odborníkom na ortézy.
- Ortézu Push si pred každým nasadením najskôr skontrolujte, aby ste však postrehi prípadné známky potrebenia alebo starnutia súčasť alebo stehy. Optimálnu funkciu ortézy Push možno zaradiť len vtedy, ak je výrobok neporušený.
- V zmysle nariadenia EU 2017/745 o zdravotníckych pomôckach musí používať výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používaťel bydlisko, nahlásiť všetky nezbedy nehody súvisiace s týmto výrobkom.

Push® je registrovaná známka spoločnosti Nea International bv

## 한국어

## PUSH MED 팔꿈치보호대

### 소개

Push med 제품은 근골격질 질환을 치료하고 예방하는 효과적인 솔루션입니다.

효과가 좋으며, 편안한 사용법, 고품질이 특징인 Push med 제품의 새로운 팔꿈치보호대입니다. Push med 팔꿈치보호대는 피치는 정도를 제한하여 통증을 완화시킵니다. 또한, 재력을 증가시킵니다. 물리적인 지지력과 조정 가능한 압력, 좋은 자세 유지를 통해 최적의 성능을 제공합니다.

혁신적인 Push med 제품은 최적의 보조 기능을 발휘합니다. 최대한 보호받으며 더 자유롭게 움직일 수 있습니다. 또한, 만족스러운 사용을 보장합니다.

Push med 팔꿈치보호대를 사용하기 전에 제품 정보를 주의해서 읽어 보세요. 궁금한 점이 있으시면 판매점에 문의하시거나, info@push.eu로 이메일을 보내주세요.

### 제품 특성

Push med 팔꿈치보호대는 팔꿈치 관절의 늘어짐을 제한하는 정도를 지속적으로 조절할 수 있습니다. 따라서 과도한 퍼짐을 방지합니다. 한 손으로 필요인 압력을 쉽게 조절할 수 있습니다. 두 개의 보강재가 골신 동작과 퍼짐 동작을 지지하고 방향을 유지합니다. 매딩 소재의 폼포트 존은 팔꿈치의 취약한 부위를 위해 만들어졌습니다. 인체공학적인 구조와 실린 소재를 적용하여 동작 중 보호대가 경위치를 유지합니다. 보호대는 편안한 고품질 소재 Sympress™으로 제조되었습니다. 극세사를 사용하여 내부가 부드러운 피부를 건조하게 유지합니다. Push med 팔꿈치보호대는 일반 세탁이 가능합니다.

### 적용증

- 과신장 외상 후 통증
- 관절증
- 주두정맥낭염
- 충격

보호대를 착용할 수 없거나 착용하면 안되는 것으로 알려진 장애는 없습니다. 사지제 또는 혈액 순환이 좋지 않을 경우, 보호대는 증혈증을 유발할 수 있습니다. 보호대를 처음 착용 시 너무 짧지 않도록 하십시오.

통증이 있다면 주의하셔야 합니다. 통증이 지속되거나 악화되면, 주치의나 물리치료사에게 문의하십시오.

### 사이즈 선택 / 피팅

팔꿈치보호대는 5가지 사이즈가 있습니다. 팔꿈치를 펼치다. 포장의 그림과 같이 팔꿈치 둘레를 잡니다. 팔꿈치의 포에 따라 정확한 손목보호대 사이즈를 선택합니다.

A. 모든 후크와 루프 패스너를 느슨하게 합니다. 팔꿈치가 약간 구부러지도록 손바닥을 자신으로 향합니다.

보강재 끝에서 보호대를 팔 쪽으로 밀어 넣습니다.

보강재의 충축 및 우측 끝을 교차시켜 보호대를 팔에 대칭으로 맞춥니다.

보호대가 적절하게 지기 잡은 경우 팔꿈치 돌출부가 개방되어야 합니다.

팔을 들어 올려 지퍼를 닫습니다.

B. 비탄성 고정대를 이용한 퍼짐을 제약하는 정도를 설정합니다. 후크와 루프 패스너를 손 방향으로 부착하여 팔꿈치가 피치는 동작을 더 많이 제약할 수 있습니다.

C. 위팔의 뒤에서 비탄성 고정대를 고정합니다.

### 세탁 지침

위생을 개선하고 보호대의 수명을 최대화하기 위해 세탁 지침에 따라 보호대를 정기적으로 세탁해야 합니다.

한 동안 보호대를 사용하지 않으면 보관하기 전에 보호대를 세척하고 건조하는 것이 좋습니다.

세탁하기 전에 후크와 루프 패스너를 잠구 보호대와 세탁물을 보호하세요.

최대 30°C 온도로 섬세한 직물을 모든 손으로 보호대를 세탁할 수 있습니다. 표백제를 사용하지 마십시오.

부드럽게 회전하는 물수기를 사용할 수 있습니다. 탈수 후 보호대를 빨래통에 걸어서 옥외에서 건조하십시오(드라이기 또는 드럼 건조기를 사용하지 마십시오).

### 중요 사항

- Push 보호대를 적절하게 사용하지 위해 의사 또는 물리치료사의 진단이 필요할 수 있습니다.
- Push 보호대는 부상을 입지 않은 피부에 착용하도록 고안되었습니다. 부상을 입은 피부는 먼저 적절한 소재로 덮어야 합니다.
- 정확한 사이즈를 선택할 때 최적의 기능을 발휘할 수 있습니다. 구입하기 전에 보호대를 착용하여 알맞은 사이즈인지 확인하십시오. 소매매입제의 전문 직원인 Push 보호대를 착용하는 최상의 방법을 설명해 드릴 것입니다. 필요할 때 피팅 지침을 보기 위해 본 제품 설명서를 안전한 장소에 보관하십시오.

- 제품의 개별 조정이 필요하면 보호대 전문가에게 문의하십시오.
- Push 보호대를 사용하기 전에 마모되거나 낡은 부품이나 연결부위가 있는지 확인하십시오. Push 보호대가 온전한 상태일 때에만 최적의 성능이 보장됩니다.
- 의료 장치에 대한 EU 규정 2017/745에 따라, 사용자는 제품과 관련된 중대한 사고를 제조업체 및 사용자의 거주하는 회원국의 관할 당국에 보고해야 합니다.

Push®는 Nea International의 등록 상표입니다.

지역별 판매점에 대한 상세 정보는 www.push.eu/distributors를 참조하십시오.

## РУССКИЙ

### ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаннй к использованию ортеза Push med Elbow Brace на локтевой суставе не выявлено. Избегайте чрезмерно тугого наложения ортеза Push med Elbow Brace на локтевой сустав для предотвращения симптомов нарушения периферического кровоснабжения в предплечье и кисти. В случае сохранения боли или ухудшения состояния обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

### ПОДБОР РАЗМЕРА

Сантиметровой лентой измеряют окружность локтевого сустава (см. рисунок на упаковке). Ортез производится в пяти размерах (см. таблицу подборов размера на упаковке).

Чтобы убедиться в правильном выборе размера, рекомендуется примерить ортез.

### ПРАВИЛА УХОДА

Для того чтобы ортез оставался гигиеничным и чтобы продлить срок его службы, важно регулярно его стирать, соблюдая инструкции по стирке. Если вы не собираетесь использовать ортез в течение некоторого времени, рекомендуется вымыть и высушить ортез перед хранением. Перед стиркой застегните застежки-липучки «Велкро». Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная стирка при температуре не выше +30° C. Не применяйте хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

### СОСТАВ

Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала Sympress™. Использование микроволокна обеспечивает ощущение мягкости и поддерживает кожу сухой.

### РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1, 2, 3, 4, 5

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

### СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускайте прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции.

### Гарантийными случаями не являются

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

|   |   |
|---|---|
| Артикул   | 2.70.2  |
| Производитель   | NEA International BV (NEA Интернешнл Бивиз) www.push.eu   |
| Импортер  | ООО «НИКАМЕД», Россия 127015, Москва, Бульварный проезд, д. 14, стр. 2                          |
| Предназани направления  | Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: ssk@nikamed.ru. |
| <span>Товар является медицинским изделием</span><br>Отпускается без рецепта   |   |
| Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04856 от 14.10.2016 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен |   |

|   |  |
|---|--|
| <span>Товар является медицинским изделием</span><br>Отпускается без рецепта   |  |
| Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04856 от 14.10.2016 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен |  |

### СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Ортез Push med Elbow Brace на локтевой суставе обеспечивает последовательное изменение ограничения разгибания локтевого сустава, что предотвращает избыточное растяжение связок. Конструкция ортеза позволяет самостоятельно регулировать ограничение движения. Две жесткие накладки обеспечивают фиксацию и объем сгибания-разгибания в локтевом суставе. Смягчающие вставки на уязвимых участках локтя предупреждают натирание. Анатомический крой, материалы и силиконовая аппликация обеспечивают стабильное положение ортеза на локте при движении. Высококачественный комфортный материал Sympress™ обеспечивает оптимальный влаго-воздухообмен (система термомониторинга).

Ортез Push med Elbow Brace удобен для самостоятельного наложения без посторонней помощи и рассчитан на регулярный гигиенический уход (стирку).

Push® является зарегистрированной торговой маркой компании «Nea Интернешнл Бивиз» (Nea International bv)

Для получения подробной информации о дистрибуторе в вашей стране перейдите по ссылке www.push.eu/distributors

## РУССКИЙ

### ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Новые ортезы Push med представляют собой медицинскую продукцию, которая характеризуется высоким уровнем эффективности, комфорта и качества. Фиксация сильной степени и регулируемая компрессия эффективно стабилизируют сустав и снижают болевые ощущения. Продукция Push med является инновационной и произведена для Вас с особой тщательностью для максимальной безопасности и комфортного использования. Перед использованием ортеза внимательно прочитайте инструкцию. Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо по адресу sales@nikamed.ru

### ОРТЕЗ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ PUSH MED ELBOW BRACE АРТИКУЛ: 2.70.2

### НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Повреждения связок локтевого сустава.
- Артрозы и артриты локтевого сустава, в т.ч. ревматоидные.
- Период реабилитации после переломов костей в области локтевого сустава.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

### ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Перед надеванием ортеза необходимо растянуть застежку «молния» и липучки «Велкро».

- Наденьте ортез на локтевой сустав. Для этого попеременно натягивайте правый и левый концы боковых локтевых накладок, чтобы ортез надевался на руку симметрично. Ортез надед правильно, если Вы ощущаете выпячивание локтя в отверстия ортеза.
- Поднимите руку, чтобы добраться до застежки-«молнии» и закрыть ее.
- Закрепите незастегнутую повязку на задней поверхности плеча.
- С помощью незастегнутых лент задайте необходимый предел натяжения. Разгибание локтя регулируется дополнительной фиксацией на руке ленты с застежкой-липучкой «Велкро».

### РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- При использовании ортеза Push med Elbow Brace на локтевой суставе может потребоваться консультация лечащего врача.
- Изделия Push предназначены для того, чтобы их использовали на неповрежденной коже. Если кожа повреждена, то она должна быть защищена подходящим материалом перед надеванием изделия.
- Оптимальное функционирование может быть достигнуто только посредством выбора правильного размера. Примерьте изделие перед покупкой, чтобы проверить его размер. Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила надевания ортеза Push med Elbow Brace. Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда иметь возможность прочесть инструкции по правильному использованию ортеза.

- Проконсультируйтесь у специалиста, если ортез Push med Elbow Brace требует индивидуальной подгонки.
- Функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза Push med Elbow Brace или при расхождении швов. Не забывайте проверять ортез Push med Elbow Brace на наличие признаков повреждения перед каждым использованием.

- В рамках постановления ЕС 2017/745 о медицинских изделиях пользователь должен сообщить о любом серьезном инциденте, связанном с изделием, производителю и компетентному государственному органу, в котором зарегистрирован пользователь.

Зيادة нпщافة الشخصفة وإملاطة مة إلاملة مة إلاملة مع المعم غسل الةامة بانتظام وإتباع تعليمات غسلها.

إذا كنت تدرى عدم استخدام الةامة لبعض الوقت، فوصلك بغسل الةامة وتخفيفها قبل ارتداؤها.

قبل غسل الةامة قطعاً ربط الةامة (الخطاطيف و الحلقاء) وذلك لحماية الةامة والملاصق الأخرى.

يمكن غسل الةامة عند حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية في دورة أقمشة سريعة أو باستخدام أي عوامل مبيضة للملابس.

يمكن استخدام دورة لطيفة سريعة الدوران وجافة، ثم غلق ال



