

PUSH CARE NECK BRACE

INTRODUCTION

Push care products provide effective solutions when your freedom of movement is restricted by an injury or disorder. Approved by physicians and scientists.

Your new neck brace is a Push care product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push care neck brace provides pain relief by stabilising the cervical vertebrae. Mechanical support and good anatomic fit constitute the basis of its performance.

Push care products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and carefree use.

Read the product information carefully before you use the Push care neck brace.

If you have any questions, please consult your reseller or send an e-mail to info@push.eu.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push care neck brace provides support to the vertebral column by its anatomic shape and the use of semi-rigid foam. The brace is made of Sympress™, a high-quality comfortable material. The use of microfibres makes the inside feel soft and keeps the skin dry. The Push care neck brace is easy to apply and can be washed without any problem.

INDICATIONS

- Complaints caused by whiplash
- Acute neck injury
- Mild cervical arthrosis

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn.

Avoid applying the brace too lightly in the beginning.


Pain is always a sign of warning. If the pain persists or the complaint deteriorates, it is advisable to consult your doctor or therapist.

DETERMINING SIZE / FITTING

The neck brace is available in 2 circumferences and 2 heights. Hold the head straight and measure the circumference of the neck from the back over the Adam's apple. The table on the packaging shows the correct brace size for your neck circumference. The required height is determined during fitting. The head is properly supported when it is in a neutral position.

- Hold the brace in both hands in front of you, so that the inside is visible. The point at the centre of the brace should be pointing down.
- Then close the hook and loop fastener at the back of the neck.

WASHING INSTRUCTIONS

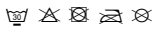

Before washing, close the hook and loop fasteners to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30° C, on a delicate fabrics cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used: after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

To extend the brace's service life, it should be dried after use, if necessary, before being stored.

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist. Please be aware that an ill-fitting brace does not function properly.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Fit the brace before use, to check its size. Your reseller's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. Save the product information, to be able to reread the fitting instructions later.
- Consult a specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace each time before using for signs of wear or ageing of parts or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.

PUSH CARE CERVICALSTÜTZE

EINLEITUNG

Push Care Produkte bieten wirksame Lösungen an, wenn Ihre Bewegungsfreiheit durch eine Verletzung oder eine Funktionsstörung eingeschränkt ist. Empfohlen von Ärzten und Wissenschaftlern.

Ihre neue Zervikalstütze ist ein Push Care Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Zervikalstütze stützt die Halswirbelsäule und wirkt dadurch schmerzlindernd. Mechanische Unterstützung und gute anatomische Passform bilden die Grundlage dieser Bandage.

Push Care Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und sorgenlose Benutzung.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen durch bevor Sie die Push Care Zervikalstütze benutzen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ihre Push Care Zervikalstütze unterstützt Ihre Wirbelsäule durch ihre anatomische Form und die Verwendung von halb-starren Schaum. Die Bandage ist aus Sympress™, einem hochqualitativen komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofaser sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken. Die Push Care Zervikalstütze ist leicht anzubringen und kann problemlos gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Beschwerden nach Schleudertrauma
- Akute Nackenverletzungen
- Leichte zervikale Arthrose

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Vermeiden Sie es, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.


Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Zervikalstütze ist in 2 Größen und 2 Höhen erhältlich. Halten Sie den Kopf gerade und messen Sie den Nackenumfang von hinten bis zum Adamsapfel. Die Tabelle auf der Verpackung zeigt die richtige Größe für Ihren Nackenumfang an. Die erforderliche Höhe wird beim Ausprobieren festgestellt. Der Kopf ist gut gestützt, wenn er sich in seiner natürlichen Haltung befindet.

- Halten Sie die Zervikalstütze in beiden Händen vor sich, so dass die Innenseite sichtbar ist. Der Punkt in der Mitte der Stütze sollte nach unten zeigen.
- Schließen Sie anschließend den Klettverschluss hinten am Nacken.

WASCHHINWEISE

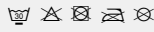

Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und andere Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30° C im Schonwaschgang gewaschen oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleuderprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

Um die Lebensdauer der Bandage zu verlängern, sollte sie ggf. vor der Lagerung nach jedem Benutzen getrocknet werden.

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Optimale Wirkung kann nur durch Auswahl der richtigen Größe erzielt werden. Probieren Sie die Bandage vor dem Kauf an, um ihre Größe zu überprüfen. Ihr Fachhändler wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage am besten anprobieren. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, um die Anweisungen zum Anlegen später nachlesen zu können.
- Wenden Sie sich an einen Fachmann, wenn das Produkt individuell angepasst werden muss.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihre Push Bandage auf Anzeichen von Verschleiß oder Alterung der Teile oder Nähte. Optimale Leistung Ihrer Push Bandage kann nur gewährleistet werden, wenn sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet.

PUSH CARE NEKBRACE

WOORD VOORAF

Push care producten bieden oplossingen wanneer u door een blessure of aandoening wordt beperkt in uw bewegingsvrijheid. Verantwoord door medici en wetenschappers.

Uw nieuwe nekbrace is een Push care product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push care Nekbrace biedt pijnverlichting door het stabiliseren van de halswervels. Mechanische steun en een goede anatomische vorm staan hiervoor aan de basis.

Push care producten zijn innovatief en worden met zorg voor u gemaakt. Dit met het oog op maximale zekerheid en een zorgeloos gebruik.

Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push care Nekbrace aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push.eu.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Uw Push care Nekbrace biedt goede steun aan de halswervelkolom door de anatomische vorm en het gebruik van vormvast schuim. De brace is vervaardigd met Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. Door het gebruik van microvezels voelt de binnenzijde zacht aan en blijft de huid droog. De Push care Nekbrace is eenvoudig aan te leggen en kan probleemloos gewassen worden.

INDICATIES

- Klachten ten gevolge van een whiplash
- Lésion aiguë du cou
- Arthrose cervicale modérée

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.

Pijn is altijd een waarschuwingsteken. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

AANMETEN / AANLEGGEN

De nekbrace is verkrijgbaar in 2 omvangsmaten en 2 hoogtematen. Houdt het hoofd recht en leg de centimeter van achter de hals over de adamsappel. In de tabel op de verpakking vindt u de juiste maat behorende bij de halsomtrek. De gewenste hoogte wordt door passen bepaald. Bij een juiste ondersteuning dient het hoofd in een neutrale positie te staan.

- Houdt de brace met twee handen voor u, zodat de binnenkant zichtbaar is. De punt in het midden van de brace moet naar beneden wijzen.
- Sluit vervolgens het klittenband achterin de nek.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT



Sluit het klittenband voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.

De brace kan gewassen worden bij maximaal 30° C, fije was of handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.

De brace mag licht gecentrifugeerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen (niet bij de verwarming of in een droogtrommel).

Voor een lange levensduur is het belangrijk uw brace na gebruik, indien nodig, eerst te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van uw Push brace kan een diagnose door een arts of therapeut noodzakelijk zijn.
- Voor een optimale functie is een juiste maatkeuze essentieel. Past u daarom vóór aankoop uw brace om de maat te controleren. Het vakkundige personeel van uw verkooppunt legt u uit hoe u uw Push brace optimaal aanlegt. Bewaar de productinformatie zodat u later de aanleginstructies kunt nalezen.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controler vóór elk gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of stiknaden waarneembaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intact is.

COLLIER CERVICAL PUSH CARE

INTRODUCTION

Les produits Push Care vous apportent des solutions efficaces lorsque votre liberté de mouvement a été restreinte par une blessure ou par un trouble. Approuvés par les médecins et par les scientifiques.

Votre nouvelle minerve est un produit Push care se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. Le collier cervical Push care assure un soulagement de la douleur en stabilisant les vertèbres cervicales. Un support mécanique et un bon ajustage anatomique constituent la base de son fonctionnement.

Les produits Push care sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une utilisation sans souci sont ainsi garanties. Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser la minerve Push care. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Votre minerve Push care soutient la colonne vertébrale grâce à sa forme anatomique et à l'utilisation d'une mousse semi-rigide. L'orthèse est faite en Sympress™, un matériel confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibres rend l'intérieur doux et maintient la peau sèche. La minerve Push care est facile à appliquer et se lave sans aucun problème.

INDICATIONS

- Affections provoquées par un coup de fouet cervical
- Lésion aiguë du cou
- Arthrose cervicale modérée

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port de l'orthèse. Evitez de serrer l'orthèse trop fort au début.


La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

Le collier cervical est disponible in 2 circonférences et 2 hauteurs. Gardez la tête bien droite et mesurez le tour de cou de la nuque à la pomme d'Adam. Le tableau sur l'emballage vous indique la taille qui convient à votre tour de cou. La hauteur requise se détermine pendant l'ajustage. La tête est correctement soutenue lorsqu'elle est en position neutre.

- Tenez la minerve des deux mains face à vous, de sorte que l'intérieur soit apparent. Le point au centre de la minerve devrait être dirigé vers le bas.
- Fermez ensuite la fermeture à boucles et à crochets à l'arrière du cou.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

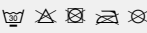

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger le bandage et l'autre linge.

L'orthèse peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30° C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher l'orthèse à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge).

Pour prolonger la durée de vie de l'orthèse, celle-ci devrait être séchée après avoir été utilisée et, au besoin, avant d'être rangée.

ATTENTION

- L'utilisation appropriée de l'orthèse Push peut nécessiter le diagnostic d'un médecin ou d'un physiothérapeute.
- Son fonctionnement optimal ne peut être obtenu que si vous choisissez la bonne taille. Essayez l'orthèse avant de l'acheter afin de vérifier la taille. Le personnel professionnel de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière d'ajuster votre orthèse Push. Conservez les informations du produit afin de pouvoir relire les instructions d'ajustage ultérieurement.
- Consultez un spécialiste si le produit exige une adaptation individuelle.
- Vérifiez votre orthèse Push avant chaque utilisation afin de détecter tout signe d'usure ou de vieillissement des pièces ou des coutures. L'efficacité de votre orthèse Push ne peut être garantie que si le produit est parfaitement intact.

COLLARE CERVICALE PUSH CARE

INTRODUZIONE

I prodotti Push Care offrono soluzioni efficaci quando la vostra libertà di movimento è limitata da una lesione o da un disturbo. Sono inoltre approvati da medici e ricercatori.

Il vostro nuovo collare cervicale è un prodotto Push Care, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, comfort e qualità. Il collare cervicale Push Care fornisce sollievo dal dolore e stabilizza le vertebre cervicali. Il supporto meccanico e la corretta forma anatomica costituiscono la base delle sue prestazioni.

I prodotti Push Care sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza ed un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare il collare cervicale Push Care, vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domande e/o osservazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il collare cervicale Push Care fornisce sostegno alla colonna vertebrale grazie alla sua forma anatomica e all'impiego di schiuma semirigida. Il prodotto è realizzato in Sympress™, un materiale confortevole di alta qualità. L'uso di microfibre rende la parte interna morbida al tatto mantenendo la pelle asciutta. Il collare cervicale Push Care è facile da applicare e può essere lavato senza alcun problema.

INDICAZIONI

- Disturbi causati da un colpo di frusta
- Lesione acuta al collo
- Lieve artrosi cervicale

Non vi sono disturbi noti che sconsigliano l'uso del prodotto. Evitate di applicare il prodotto stringendolo troppo all'inizio.


Il dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o i disturbi peggiorano, è consigliabile consultare il vostro medico o il vostro fisioterapista.

COME STABILIRE LE GIUSTE DIMENSIONI/LA GIUSTA TAGLIA

El collarin cervical es disponible en 2 circonférences et 2 alteztes. Tenendo il capo dritto, misurate la circonferenza del collo dalla parte posteriore fino al pomo di Adamo. Nella tabella riportata sulla confezione potrete individuare le dimensioni corrispondenti alla circonferenza del vostro collo. Per stabilire la giusta altezza, è necessario indossare il prodotto. La testa viene sorretta correttamente quando è in posizione neutra.

- Tenete il collare con entrambe le mani davanti a voi, in modo tale che l'interno sia visibile. Il punto al centro del collare dovrebbe essere orientato verso il basso.
- Chiudere ora la chiusura a ganccio e occhioello dietro il collo.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

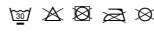

Prima del lavaggio, chiudere le chiusure a ganccio e occhioello per proteggere il prodotto e gli altri capi da lavare.

Il prodotto può essere lavato fino ad temperatura di 30° C, a mano o utilizzando un ciclo per tessuti delicati. Non utilizzare alcun candeggio.

È possibile utilizzare un ciclo delicato di centrifuga: una volta terminato, stendete il prodotto ad asciugare all'aria aperta (non nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria).

Per prolungare la durata del prodotto vi consigliamo di asciugarlo dopo l'uso, se necessario, prima di conservarlo.

IMPORTANTE

- Per un corretto uso del prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un fisioterapista.
- Il funzionamento ottimale del prodotto è garantito soltanto se si sceglie la misura giusta. Provate il prodotto prima di acquistarlo, per controllare che la taglia sia adeguata. Il personale del punto vendita vi spiegherà in che modo indossare al meglio il prodotto Push. Conservate le informazioni sul prodotto, così da poterle consultare in seguito.
- Consultate uno specialista nel caso in cui il prodotto dovesse essere adattato alla vostra persona.
- Prima di usare il prodotto Push controllate sempre che non presentî segni di usura o un invecchiamento di parti o cuciture. Le prestazioni ottimali del prodotto Push possono essere garantite solo se il prodotto è completamente integro.

COLLARÍN PUSH CARE

INTRODUCCIÓN

Los productos Push care aportan soluciones allí en donde se ve restringida la libertad de movimientos debido a lesiones o traumatismos. Están recomendados por médicos y científicos.

El nuevo collarín es un producto Push care caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. El soporte para el cuello Push care alivia el dolor estabilizando las vértebras cervicales. El apoyo mecánico y un buen ajuste anatómico constituyen la base de su rendimiento.

Los productos Push care son realmente innovadores y están fabricados para usted con un esmerado cuidado. Esto garantiza el máximo de seguridad y un fácil uso.

Antes de usar el collarín Push care, lea cuidadosamente la información del producto. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a info@push.eu.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El collarín Push care ofrece un apoyo para la columna vertical gracias a su forma anatómica y al uso de una espuma semirígida. El collarín está hecho de Sympress™, un cómodo material de gran calidad. El uso de microfibras proporciona una sensación suave y mantiene la piel seca. El collarín Push care es fácil de aplicar y se puede lavar sin problemas.

INDICACIONES

- Molestias a causa de fatigazo cervical
- Lesión aguda del cuello
- Artrosis cervical suave

No se conocen trastornos que impidan el uso del collarín. Evítese la colocación del collarín excesivamente apretado al principio.


El dolor es siempre una señal de aviso. Si el dolor continúa, es aconsejable consultar con el médico o el fisioterapeuta.

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO / AJUSTE

El collarín se encuentra disponible en 2 circonféncias y 2 alturas. Mantenga la cabeza derecha y mida la circunferencia del cuello desde la parte de atrás pasando por encima de la nuez. El cuadro que viene en el envoltorio muestra la talla correcta para la circunferencia de su cuello. La altura correcta se determina durante el ajuste. La cabeza está apoyada correctamente cuando está en una posición neutra.

- Aguante el collarín con ambas manos frente a usted de forma que vea la parte interior. El punto del centro del collarín deberá apuntar hacia abajo.
- Después, abrache el cierre de gancho y lazo en la nuca.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

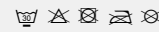

Antes de proceder con el lavado, abrache los cierres de gancho y lazo para proteger la toallera y otras prendas.

Se puede lavar a una temperatura de hasta 30° C en un programa de tejidos delicados o a mano. No emplee nunca agentes blanqueadores.

Se puede usar un centrifugado suave. Después tienda el collarín para que se seque al aire (nunca cerca de una fuente de calor o con una secadora).

Para alargar su vida útil, deberá secarse después de su uso y antes de guardarlo.

IMPORTANTE

- Para un correcto uso del collarín, solicite el diagnóstico de un médico o un fisioterapeuta.
- Sólo se podrá conseguir un funcionamiento óptimo seleccionando el tamaño adecuado. Ajustese el collarín antes de comprarlo para comprobar su tamaño. Los profesionales de los puntos de venta le explicarán la mejor forma de hacerlo. Conserve las instrucciones del producto para poder volver a leerlas más adelante.
- Consulte con un especialista si el producto requiere una adaptación personalizada.
- Compruebe si hay signos de uso o desgaste en las diferentes partes y costuras del collarín cada vez que lo use. Sólo se garantiza un rendimiento óptimo del collarín si el producto está intacto.

LIGADURA DE PESÇOÇO PUSH CARE

INTRODUÇÃO

Os produtos Push Care oferecem soluções eficazes quando a sua liberdade de movimentos está limitada por uma lesão ou desordem. Aprovado por médicos e cientistas.

A sua nova ligadura de pesçoço é um produto Push Care, caracterizado por um elevado nível de eficácia, conforto e qualidade. A ligadura de pesçoço Push Care proporciona alívio da dor estabilizando as vértebras cervicais. O apoio mecânico e uma boa adaptação anatómica constituem a base do seu desempenho.

Os produtos Push Care são inovadores e fabricados com todos os cuidados. Isso assegura segurança máxima e utilização simplificada.

Leia atentamente a informação do produto antes de usar a ligadura de pesçoço Push Care. Em caso de dúvidas, consulte o seu revendedor ou envie um e-mail para info@push.eu.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A sua ligadura Push care oferece apoio para a coluna vertebral pela sua forma anatómica e utilização de espuma semi-rígida. A ligadura é feita de Sympress™, um material confortável de alta qualidade. A utilização de microfibras faz sentir o interior macio e conserva a pele seca. A ligadura de pesçoço Push Care é fácil de aplicar e pode ser usada sem qualquer problema.

INDICAÇÕES

- Queixas devido a esticão
- Lesão aguda no pesçoço
- Artrose cervical leve

Não há desordens conhecidas em que a ligadura não possa ou não deva ser usada. Evite apertar demasiado a ligadura no início.


A dor é sempre um sinal de aviso. Se a dor persistir ou as queixas se agravarem, é aconselhável consultar o seu médico ou terapeuta.

DETERMINAÇÃO DO TAMANHO / APLICAÇÃO

A ligadura de pesçoço está disponível em 2 circunferências e 2 alturas. Mantenha a cabeça direita e meça a circunferência do pesçoço sobre a maçã-de-adão. O quadro inserido na embalagem mostra o tamanho correcto para a sua circunferência de pesçoço. A altura requerida é determinada durante a aplicação. A cabeça é convenientemente suportada quando se encontra numa posição neutra.

- Segure a ligadura com ambas as mãos à sua frente, de modo a tomar o interior visível. O ponto no centro da ligadura deve estar a apontar para baixo.
- Aperte a faixa autocolante na parte de trás do pesçoço.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

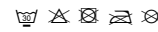

Antes de lavar, aperte as faixas autocolantes para proteger a ligadura e as outras peças de roupa.



A ligadura pode ser lavada a temperaturas até 30° C, num programa para tecidos delicados ou à mão. Não utilize agentes branqueadores.

Pode ser usado um ciclo de centrifugação moderado: em seguida, pendure a ligadura para secar ao ar livre (não nas proximidades de uma fonte de calor nem num secador).

A fim de prolongar a vida útil da ligadura, esta deve ser seca após utilização, se necessário, antes de ser guardada.

IMPORTANTE

- A utilização adequada da ligadura Push pode exigir diagnóstico por um médico ou terapeuta.
- O funcionamento óptimo só pode ser conseguido escolhendo o tamanho correcto. Experimente a ligadura antes de comprar, para verificar o tamanho. O pessoal profissional do seu revendedor explicará a melhor maneira de experimentar a ligadura Push. Guarde a informação do produto, para poder consultar mais tarde as instruções de aplicação.
- Consulte um especialista se o produto necessitar de adaptação individual.
- Observe sempre a ligadura Push antes de utilizar, procurando sinais de desgaste ou envelhecimento das peças e costuras. O desempenho óptimo da sua ligadura Push só pode ser garantido se o produto estiver intacto.

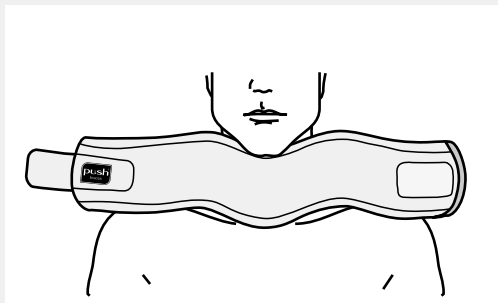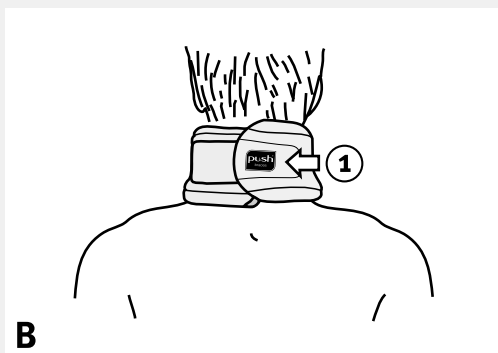**A****B**

Material composition / Materialzusammensetzung

Polyurethane / Polyurethan	30%
Polyester / Polyester	28%
Polyamide / Polyamid	27%
Others / Sonstige	15%

Latex free / Enthält kein Latex

日本語

PUSH頸部保護サポーター

はじめに
　Push 保護製品は、動作の自由が怪我または障害によって制限される場合の有効な解決策を提供します。これは医者や科学者により承認されています。

新しい頸部保護サポーターのPush 保護製品は、高水準の効能と快適性と品質を特色としています。Push care neck brace（首痛補具）は、首痛を安定させることによって、痛みを和らげます。機械的な支柱と良い解 剖学的整合性は、そのハブ オームンスの基礎となっています。

Push 保護製品は、革新的でユーザーのために大きな配慮を製造されており、これにより最大の安全と心配のない使用が確実にになります。

Push頸部保護サポーターを使う際には、製品情報をご覧ください。ご質問の場合には、販売店にお問い合わせいただくか、info@push.euへ電子メールでご連絡ください。

製品特徴

Push頸部保護サポーターは、その解剖学的な形状と半固体の発泡体を使用し、脊柱に支柱を提供します。サポーターは、高品質で快適な材料である Sympress™ でできています。ミクロ繊維の使用で内部はソフトで皮膚の蒸れを防ぎます。Push 保護頸部サポーターは、使 用が簡単で問題なしに洗濯することができます。

効能

- むち打ち症による愁訴
- 急性頸部損傷
- 軽度の頸部関節症

サポーターを着けることができないか、着けるべきではないか言う 障害のケースはあります。始めは、サポーターをあまりきつく 用 用することを避けてください。

痛みは常に警告の徴候です。痛みが持続するかその病勢が悪化する場合には、医師または理学療法士と相談されることをおすすめします。

サイズ・適合の決定

Push頸部保護サポーターには、頸部周りと高さにより各2種類があります。頭を真つ直ぐにし、背中から竜広の上の頸部周りを計ってください。バックジンジのテーブルには、頸部周りと高さの測定方法があります。必要な高さは整合時に測定されます。頭は 中立の位置にあるときに、きちんと支へられます。

- 両手であなただの前でサポーターを持ち、内部が見えるようにしてください。サポーターの中心点は下を指していなければなりません。

- そして頸部の後ろで面ファスナーを閉じてください。

洗濯に関して

☞ ☒ ☜ ☛ ☞ ☜ ☛

洗たくの前には、サポーター他の洗濯物を保護するために面ファスナーを閉じてください。サポーターは、30度Cの温度の洗濯機で注意が必要な繊維サイクルまたは手で洗濯することができます。漂白剤は使用しないでください。ゆるやかな回転乾燥サイクルを使ってください。その後、サポーターを大気中に掛け（熱源の近くや回転式乾燥機以外で）乾かしてください。サポーターの使用を長持ちさせるため、必要に応じ使用後は保管前に乾燥してください。

重要

- Pushサポーターの適正使用には、医師または理学療法士による診断を必要とする場合があります。
- 最適な機能は、正しいサイズを選ぶことによるのみ引出すことができます。購入の前には、そのサイズをチェックするため、サポーターのフィット具合を試してみてください。販売店の専門家が Pushサポーターを合わせるためのベストな方法をご説明します。後で合わせる際に指示書を再読する必要があるため、製品情報を保存しておいてください。
- 製品につき個々の適合が必要な場合は、専門家に相談ください。
- Pushサポーターを使う前に、損耗や部品または錆い目の加齢による徴候をチェックしてください。Pushサポーターの最適な効能は、製品が完全に無傷である場合にのみ保証することができます。

 Push ®は、オランダのNea International bv 社
<p>1 1039-80 1 / 6</p>

ČESKY

KRČNÍ LÍMEC ŘADY PUSH CARE

ÚVOD

Výrobky Push care představují účinné řešení tam, kde je volnost tělesného pohybu v důsledku úrazu nebo poruchy omezená. Schvalují je lékaři i vědci.

Váš nový krční límeč je výrobkem řady Push care, jehož charakteristikou je vysoká efektivnost, pohodlnost a kvalita. Krční límeč Push care poskytuje díky stabilizaci krčního obrátlu úlevu od bolesti. Funkce spočívá v mechanické podpoře ve spojení s dobrým anatomickým tvarováním.

Výrobkům Push care je při jejich výrobě věnována nejvyšší péče a mají moderní konstrukci. Tim je zajištěna jejich maximální bezpečnost a lze je nosit zcela bez obtav.

Před použitím krčního límece Push care si dobře prostudujte informace o výrobku. Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se laskavě na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu: info@push.eu.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Krční límeč Push care poskytuje páteři podporu díky svému anatomickému tvaru a poskytlí polohuě péhy. Je vyroben z vysoce kvalitního a pohodlného materiálu Sympress™. Diky tomu, že obsahuje mikrovlákna, je materiál uvnitř měkký a udržuje pokožku suchou. Krční límeč Push care se snadno nasazuje a dá se bez problémů práť.

INDIKACE

- Polže vyvolané hyperextenzi krku
- Akutní poranění krku
- Méně závažná artróza obrátlu

Není známá žádná porucha, při které by se bandáž nedala nebo nesměla nosit. Zpočátku dávte pozor, abyste bandáž přilíš neutilovali.

Bolest je vždy varovným znamením. Pokud bolest přetrvává nebo se obtiže zhoršují, je vhodné poradit se s lékařem nebo terapeutem.

STANOVENÍ SPRÁVNÉ VELKOSTI / NASAZOVÁNÍ

Krční límeč se dodává ve dvou velikostech obvodu krku a ve dvou výškách. Držte hlavu rovně a změlte obvod krku odzadu přes ohyžek. Správnou velikost bandáže pro dvanu je krku udává tabulka na obalu. Pořebná výška se zjistí při nasazení. Hlava je správně podepřena, když je v neutrální poloze.

- Držte bandáž oběma rukama před sebou tak, abyste viděli vnitřek. Bod ve středu bandáže musí směřovat dolů.
- Potom v zátýku zavřete suchý zip.

PRANÍ

☞ ☒ ☜ ☛ ☞ ☜ ☛

Před praním k ochráně bandáže i ostatního prádla uzavřete suchý zip.

Bandáž se dá práť při teplotách do 30°C v režimu jemných tkanin nebo v ruce.

Bělici přípravky nepoužívejte.

Lze použít jemně odstředivou. Potom nechte bandáž uschnout volně na vzduchu (nikoli poblíž zdroje tepla; rovněž jí nedávějte do bubnové sušičky).

Abý vám bandáž dlouho vydržela, nechte jí po použití před uložením vyschnout, pokud je navhla.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Ke správnému používání bandáže Push může být zapotřebí, aby lékař nebo terapeut nejprve stanovil diagnózu.
- Bandáž může fungovat optimálně pouze tehdy, vyberete-li si správnou velikost. Před koupí si bandáž vyzkoušejte, abyste si ověřili, že jste si vybrali správnou velikost. Jak se bandáž Push správně nasazuje, vám vysvětlí prodejní personál. Informace o výrobku si uschovejte, abyste se k návodu mohli později vrátit.
- Pokud výrobek vyžaduje individuální úpravu, poradte se s odborníkem.
- Než si bandáž Push nasadíte, vždy si ji prohlédněte, abyste včas postřehli případné známky opotřebení nebo stárnutí součástí nebo švů. Optimální funkci lze u bandáže Push zaručit jen tehdy, je-li výrobek zcela neporušený.

 Push ® je registrovaná známka společnosti Nea International bv
<p>1 1039-80 1 / 6</p>

POLSKI

STABILIZUJĄCY KOLNIERZ ORTOPEDYCZNY

WSTĘP

Produkty ochronne pomocne są przy leczeniu schorzeń wymagających ograniczenia swobody ruchów zarówno powiązanych jak i przy zmianach zwyrodnieniowych. Są uznawane zarówno przez lekarzy jak i rehabilitantów.

Kolnierz ortopedyczny jest ochronnym produktem, charakteryzującym się wysoką skutecznością, jakością i jest wygodna dla pacjenta. Kolierz ortopedyczny Push care zmniejsza ból szyi stabilizując szyjny odcinek kręgosłupa. Jego działanie oparte jest na wymuszenie właściwego ustawienia odcinka kręgosłupa, co osiągnięto przez anatomiczne dopasowanie.

Kolnierze ortopedyczne są nowatorskie w kształcie i wytwarza się je z ogromną dokładnością. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, daję pewne szansę ruchu przy stworzeniu maksymalnego komfortu.

Przed użyciem kolnierza należy uważnie przeczytać informację dotyczącą tego produktu. Wszelkie zapytania proszę kierować do sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: info@push.eu

OPIS PRODUKTU

Dzięki zastosowaniu anatomicznego kształtu oraz sztywnej pianki kolnierz ochronny zapewnia częściowe odciążenie szyjnego odcinka kręgosłupa. Opaska została wykonana z tworzywa wysokiej jakości o nazwie Sympress™. Zastosowanie mikro-włókn sprawia, że wewnętrzna strona kolnierza jest miękka i skóra pod nim nie poci się. Kolnierz jest łatwy w użyciu. Można go prać.

WSKAZANIA

- Dolegliwości spowodowane przez uraz kręgow szyjnych
- Poważny uraz szyi

- Lekka artróza obrátlu

Ból zawsze stanowi ostrzeżenie. W przypadku utrzymywania się dolegliwości bólowych lub ich nasilenia należy zgłosić się do lekarza lub rehabilitanta.

WYBÓR ROZMIARU/DOPASOWANIE

Kolnierz jest dostępny w dwóch wielkościach obwodów i w dwóch wysokościach. Obwód szyi należy zmierzyć przy uniesionej głowie w miejscu pomiędzy brodą a mostkiem. Następnie należy dobrać odpowiedni rozmiar kolnierza kierując się tabelą zamieszczoneą na opakowaniu. Odpowiednią wysokość kolnierza można ustalić poprzez jego przymierzenie. Rozmiar jest dobrze dobrany, gdy po założeniu kolnierza głowa znajduje się w pozycji fizjologicznej.

- Należy chwycić kolnierz w obie ręce i trzymać przed sobą tak, aby widoczna była jego wewnętrzna strona. Punkt znajdujący się na środku kolnierza powinien być zwrócony w dół.

- Następnie należy zapiąć rzep w jego tylnę część.

KONSERWACJA

☞ ☒ ☜ ☛ ☞ ☜ ☛

W celu zabezpieczenia kolnierza, należy zapiąć /rzepy/ kolnierza.

Temperatura prania nie powinna przekraczać 30°C. Zaleca się program przeznaczony dla tkanin delikatnych lub prać ręcznie. Nie należy używać środków wybielających.

Można zastosować delikatne odwirowanie. Po upraniu kolnierz należy suszyć na wolnym powietrzu (nie przy użyciu suszarki lub w pobliżu grzejnika).

UWAGA

- Właściwe korzystanie z ortzy może wymagać porady lekarza lub rehabilitanta.
- Optymalne funkcjonowanie ortzy można uzyskać tylko w przypadku odpowiedniego dobrania rozmiaru. W związku z tym przed zakupem należy upewnić się, czy rozmiar jest właściwy. W razie wątpliwości o radę należy spytać sprzedawcę
- W przypadku, gdy niezbędne jest indywidualne dopasowanie produktu, należy skontaktować się ze specjalistą.
- Każde użycie ortzy, powinno być poprzedzone sprawdzeniem, czy nie pojawiły się przetarcia elementów ortzy lub jej szwów. Jedynie nieuszkodzony produkt daje gwarancję optymalnego działania.

 Push ® jest zarejestrowaną marką firmy Nea International bv
<p>Dane dystrybutora w Państwach kraju można znaleźć na stronie www.push.eu/distributors</p>

PUSH CARE NYAKRÖGZÍTŐ

BEVEZETÉS

A Push care termék hatékonys megoldást kínál nek, ha az Ön mozgásának szabadságát egy sérülés vagy rendelkezesség korlátozza. A védőpántok orvosok és tudósok jóváhagyásával készülnek.

Az Ön új nyakrögzítője egy olyan Push care termék, melyet magas szintű hatékonyság, kényelem és minőség jellemez. A Push care nyakrögzítő a nyaki csigolyák stabilizálásával csökkenti a fájdalomt. Hatásának alapját a mechanikus támasztás és jó anatómiai illeszkedés képezi.

A Push care termékék újítást hoznak, és a legnagyobb gondossággal készültek az Ön részére. Ez elősegíti a legnagyobb biztonságot és a gondatlan használatot.

A Push care nyakrögzítő használatá előtt gondosan olvassa el a termékútjékoztatót. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük forduljon vizionteladójához, vagy küldjön e-mail-t az info@push.eu internet címre.

TERMÉK ISMERTETŐJEGYEK

Az Ön Push care nyakrögzítője támasztja a gerincoszlopot a nyak anatómiai formáján valamint a fémerev háb alkalmazása révén. A rögzítő Sympress™-ből, egy jó minőségű, kényelem anyagból készül. A mikroszálak használata a belsőt lágy tapintatává teszi és szárazon tartja a bőrt. A Push care nyakrögzítő könnyű használni, és minden probléma nélkül mosható.

JAVALLATOK

- Ostorcsapás sérülés által okozott panaszok
- Akuta nyakú sérülés
- Eryhe nyaki arthrosis

Nincs olyan ismert rendelkezesség, amelynek fennállása esetén a rögzítőt nem lehet vagy nem ajánlatos viselni. Kezdetben ne húzza túl azorosa a rögzítőt.

A fájdalom mindig figyelmeztető jel. Amennyiben a fájdalom nem múlik, vagy a panaszok rosszabbodnak, ajánlatos felkeresnie kezelőorvost.

A MÉRÉTI MEGHATÁROZÁSA / ILLESZKEDÉS

A nyakrögzítőt két fajta körmértében és magasságban kapható. Tartsa egyenesen a fejét, és mérje meg a nyak kőrfogatát hátulról kezdve az ádámcsutka felett. A dobozon lévő címke mutatja az Ön nyaki kőrfogatának megfelelő rögzítő méretet. A kívánt méretet mindig figyelemztető jel. Amennyiben a fájdalom nem múlik, vagy a panaszok rosszabbodnak, ajánlatos felkeresnie kezelőorvost.

- Tartsa mindkét kezével magával szemben, hogy látszódjon a belseje. A rögzítő közepén lévő pont lefelé kell hogy mutasson.
- Rögzítse a tépőzárát a nyak hátsó részén.

TISZTÍTÁSI ELŐIRÁSOK

☞ ☒ ☜ ☛ ☞ ☜ ☛

Mosás előtt zárja a tépőzárát, hogy védje a rögzítőt és a többi szennyezt.

A rögzítő 30 °C-ig mosható, lágy textí programmal vagy kézzel. Ne használjon fehérítőt.

Egy óvatos centrifuga programot használhat: ezután akassa fel a rögzítőt hogy a szabad levegőn szárazjon (ne hoförás közelében vagy szárítógépben).

A rögzítő élettartamának megnövelése érdekében – amennyiben szükséges- szárítsa meg használat után, mielőtt elrakná.

FONTOS

- A Push rögzítő megfelelő használatához orvos körsímje szükséges.
- A legkedvezőbb működést csak a megfelelő méret kiválasztása esetén érheti el. Vésársís előtt próbálja fel a rögzítőt, hogy ellenőrizze a méretét. Az Ön vizionteladójának szakértő személyezte segít Önnek kiválasztani a megfelelő méretű Push rögzítőt. Örtize meg a termék-útjékoztatót, hogy a megfelelő előírásokat később újra elolvashassa.
- Keresse fel a szakembert, ha a termék egyéni átalakítást igényel.
- Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze az Ön Push rögzítőjét, hogy nem látszanak-e az elhordás, vagy előregédés jelei az alkotórészeken vagy a varrásokon. Az Ön Push rögzítője csak akkor tudja a legkedvezőbb teljesítményt nyújtani, ha a termék teljesen sértetlen.

 Push ® a Nea International bv regisztrált védjegye
<p>Om du vill ha oppgiffet er distributøren i ditt land, gå til www.push.eu/distributors</p>

SVENSKA

PUSH CARE-HALSSTÖD

INLEDNING

Push care-produkterna tillgodoser effektivt dina problem när din rörelsefrihet är begränsad efter en olycka eller en rubbning. Godkända av läkare och vetenskapsmän.

Ditt nya halsstöd är en Push care-produkt. Karakteristiskt för Push care-produkterna är höggradig effektivitet, komfort och kvalitet. Push care-halsstödet smältlinlirar genom att stabilisera cervikalkotan. Mekanisikt stöd och god anatomisk passform ligger till grund för dess prestanda.

Push careprodukterna är innovativa och tillverkas med stor omsorg. Det säkerställer maximal säkerhet och bekymmerslös användning.

Läs produktinformationen noga innan du använder ditt Push care-halsstöd. Kontakta återförsäljaren eller skicka ett e-postmeddelande till info@push.eu om du undrar över någonting.

PRODUKTKARAKTERISTIK

Ditt Push care-halsstöd stöder kolonnen genom sin anatomiska form, och genom användningen av halvstvt skummaterial. Stödet är tillverkat av Sympress™ – ett komfortabelt material av hög kvalitet. De mikrofiber som används ger en mjuk innesida och håller dessutom huden torr. Push care-halsstödet är enkelt att sätta på sig och lätt att tvätta.

INDIKATIONER

- Besvär orsakade av pisksnärtskada
- Akuta nackskade
- Mild cervikal artros

Det finns inga kända rubbningar för vilka stödet inte ska eller bör användas. Undvik att ha stödet för hårt spänt i början.

Smärta är alltid en varningssignal. Om smärtan inte går över, eller problemet förvärras, bör du kontakta din läkare eller terapeut.

BESTÄMMA STORLEK/PASSFORM

Halsstödet finns med två omkretsar och med två höjder. Håll huvudet rakt och mät omkretsen kring halsen från ryggen över Adamsäpplet. Väjl ett stöd som passar ditt halsmät med hjälp av tabellen på förpackningen. Rätt höjd bestäms vid utprovningen. Huvudet stöds på rätt sätt när det befinner sig i ett neutralläge.

- Håll stödet framför dig med bägge händerna så att insidan är synlig. Punkten i mitten av stödet ska vara riktad nedåt.
- Försätt sedan kardborrbandet bakom halsen.

TVÄTTANVISNINGAR

☞ ☒ ☜ ☛ ☞ ☜ ☛

Stäng kardborrbandsförslutningen innan du tvättar stödet för att skydda både det och den övriga tvätten.

Stödet kan tvättas vid temperatur på upp till 30 °C – antingen med ett program för känsliga material eller för hand. Använd inte blekmedel.

Lättare centrifugering är OK. Häng sedan stödet på tork – helst utomhus (häng det inte nära en värmekälla och torka det inte i en torktumlare).

Stödet håller längre om man alltid låter det torka efter användning innan man lägger undan det.

VIKTIGT

- Korrekt användning av Pushstödet kan kräva diagnos av en läkare eller terapeut.
- Storleken måste vara korrekt för optimal funktion. Prova stödet innan du köper det – så att storleken blir rätt. Den professionella personalen i butiken visar dig hur du enklast sätter på dig ditt Pushstöd. Spar produktinformationen så att du kan läsa anvisningarna på nytt vid ett senare tillfälle om du vill.
- Ta kontakt med en specialist om produkten behöver individuell anpassning.
- Kontrollera Pushstödet varje gång du ska använda det med avseende på eventuella tecken på slitage eller förslring av delar eller sömmar. Det är bara om Pushstödet är i helt felfritt skick som du får optimaia prestanda.

 Push ® är ett registrerat varumärke av Nea International bv
<p>Om du vill ha uppgifter om distributören i ditt land, gå till www.push.eu/distributors</p>

DANSK

PUSH CARE-HALSKRAVE

INLEDNING

Push care-produkter tilbyder effektive løsninger, når din bevægelsesfrihed er begrænset af en skade eller sygdom. Godkendt af læger og forskere.

Din nye halskrave er et Push care-produkt, der er kendtetegnet ved et højt effektivitets-, komfort- og kvalitetsniveau. Push care-nakkekraven stabiliserer halsvirvelne og giver smertelindring ved at stabilisere produktets cervikale støt og god anatomisk passform danner grundlaget for krages yttelse.

De innovative Push care-produktene er produsert med største omhu for din velvære. Dette sikrer maksimal sikkerhet og problemfri bruk.

Læs produktvejledningen grundigt, før du bruger Push care-halsstöd. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte forhandleren eller sende en e-mail til info@push.eu.

PRODUKTBEKRIVELSE

Push care-halskraven stætter med sin anatomiske form og brugen af halvstvt skum halsrygsøjlen. Bandagen er fremstillet af Sympress™, et behageligt materiale i høj kvalitet. Brugen af mikrofiber gør indersiden blød og holder huden tør. Push care-halskraven er let at anvende og kan uden problemer vaskes.

INDIKATIONER

- Smertes som følge af piskesmæld
- Akut nakkeskade
- Mild cervikal artrose

Der er ingen kendte lidelser, ved hvilke bandagen ikke kan eller bør anvendes. Undgå at sætte bandagen for stramt på i begyndelsen.

Smerte er altid et advarsels tegn. Hvis smerten vedvarer, eller symptomerne forværrs, bør du konsultere din læge eller bandagisten.

STØRRELSE/TILPASNING

Halskraven findes i 2 omkrede og i 2 højder. Hold hovedet lige, og mål omkredsen af halsen hen over Adamsæblet. Tabellen på pakken viser den korrekte størrelse for en krave til din halsomkreds. Den ønskede højde afgøres ved at prøve. Hovedet stattes korrekt, når det er i en neutral stilling.

- Hold kraven foran dig med begge hænder, så indersiden er synlig. Punktet på kravens midte skal pege nedad.
- Lukk deretter burrebåndet i nakken.

VASKEANVISNING

☞ ☒ ☜ ☛ ☞ ☜ ☛

Lukk burrebåndene før vask for at beskytte bandagen og evt. andet vasketøj.

Bandagen kan vaskes ved temperaturer op til 30 °C i hånden eller på et vasketprogram til sart materialer. Undgå blegemidler.

Bandagen kan centrifugeres let og skal deretter tørre i fri luft (ikke i nærheden af en varmekilde og ikke i en tørretumbler).

For at forlænge bandagens levetid, skal den om nødvendigt tørre efter brug, før den lægges på plads.

VIGTIGT!

- Korrekt brug af Push-bandagen kan kræve, at der stilles diagnose af en læge eller behandler.
- Optimal funktion opnås kun ved at vælge den rigtige størrelse. Prøv bandagen, før du køber den, for at kontrollere størrelsen. Fagligt personale hos forhandleren kan forklare, hvordan du bedst tilpasser Push-bandagen. Gem produktvejledningen, så du kan læse tilpasningsinstruktionerne igen senere.
- Konsulter en specialist, hvis produktet kræver individuel tilpasning.
- Kontroller Push-bandagens dele og sømme for tegn på slid eller ælde før hver brug. Optimal funktionsevne for Push-bandagen garanteres kun, hvis produktet er helt intakt.

 Push ® er et registreret varemærke, der ejes af Nea International bv
<p>For oplysninger om nationale forhandlere henviser vi til www.push.eu/distributors</p>

NORSK

PUSH CARE NAKKEKRAGE

INLEDNING

Push care-produkter gir effektive løsninger når bevegeselsfriheten er begrenset på grunn av skade eller sykdom. Godkjent av leger og forskere.

Din nye nakkekrage er et Push care-produkt, kjennetegnet av høy effektivitet, komfort og kvalitet. Push care nakkekrage gir smertelindring ved å stabilisere ryggvirvlene. Mekanisk støtte og riktig anatomisk tilpasning danner grunnlaget for krages ytelse.

De innovative Push care-produktene er produsert med største omhu for din velvære. Dette sikrer maksimal sikkerhet og problemfri bruk.

Les grundig igjennom produktinformasjonen før du bruker nakkekragen fra Push care. Ta kontakt med forhandleren eller send en e-post til info@push.eu hvis du har spørsmål.

PRODUKTETS EGENSKAPER

Push care-nakkekragen gir støtte til ryggvirvlene på grunn av dens anatomiske fasong og bruk av halvstvt skumgrunn. Støttebandasjen er laget av Sympress™, et behagelig materiale av høy kvalitet. Bruken av mikrofiber innvendig gir en myk følelse og holder huden tarr. Nakkekragen fra Push care er enkel å feste og kan vaskes uten problemer.

INDIKASJONER

- Symptomer grunnert whiplash
- Akut nakkeskade
- Lievå cervikal artrose