

PUSH MED ELBOW BRACE

INTRODUCTION

Push med products provide effective solutions for the treatment and prevention of injuries of the locomotor apparatus. Approved by physicians and scientists.

Your new elbow brace is a Push med product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push med elbow brace restricts stretching and provides pain relief. This increases physical strength. Mechanical support and good position retention constitute the basis of its performance.

Push med products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and more freedom of movement. To promote satisfied use.

Read the product information carefully before you use the Push med elbow brace. If you have any questions, please consult your reseller or send an e-mail to info@push.eu.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push med elbow brace features continuously adjustable extension restriction for the elbow joint. This prevents overstretching. The required degree of restriction can be set easily with one hand. Two stiffeners provide support and direction to the flexion and extension movements. So-called comfort zones of padded material have been created around vulnerable areas of the elbow. A proper anatomic fit and the material and the silicone application contribute to the brace remaining in place during movement.

The brace is made of Sympress™, a high-quality comfortable material. The use of microfibres makes the inside feel soft and keeps the skin dry. The Push med elbow brace can be washed normally.

INDICATIONS

- Complaints after hyperextension trauma
- Arthrosis
- Bursitis olecrani
- Olecranon bursitis
- Impingement

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too tightly in the beginning.


Pain is always a sign of warning. If the pain persists or the complaint deteriorates, it is advisable to consult your doctor or therapist.

DETERMINING SIZE / FITTING

The elbow brace is available in 5 sizes. Straighten the elbow. Measure the circumference of the elbow, as shown in the illustration on the packaging. The table on the packaging shows the correct brace size for your elbow.

- Release all hook and loop fasteners. Hold the inside of your hand towards you while your elbow is bent slightly. Use the stiffener ends to slip the brace on your arm Alternate between the left and right stiffener ends, to ensure that the brace fits symmetrically on the arm. The brace is properly located when you feel the protruding part of the elbow in the opening. Lift your arm to expose the zip and close the zip.
- Use the non-elastic straps to set the required stretching restriction. The stretching movement of the elbow is restricted more as the hook and loop fastener is attached further towards the hand.
- Close the non-elastic strap at the back of the upper arm.

WASHING INSTRUCTIONS

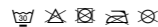

Before washing, close the hook and loop material to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30°C, on a delicate fabrics cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used: after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

To extend the brace's service life, it should be dried after use, if necessary, before being stored.

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist.
- Push braces were designed to be worn on an undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Fit the brace before purchasing, to check its size. Your reseller's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to be able to consult it for fitting instructions whenever needed.
- Consult a brace specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace each time before use for signs of wear or ageing of components or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- Within the framework of EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user is established.

Push® is a registered trademark of Nea International bv

PUSH MED ELLENBOGENBANDAGE

EINLEITUNG

Push med Produkte bieten wirksame Lösungen zur Behandlung und Vorbeugung von Verletzungen des Bewegungsapparates. Empfohlen von Ärzten und Wissenschaftlern.

Ihre neue Ellenbogenbandage ist ein Push Med Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Med Ellenbogenbandage schränkt das Strecken des Armes ein und wirkt schmerzlindernd. Dies steigert die Körperkraft. Mechanische Unterstützung und hohe Stabilität bilden die Grundlage dieser Bandage.

Push Med Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und mehr Bewegungsfreiheit. Zur Förderung einer zufriedenstellenden Verwendung.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie sich Push Med Ellenbogenbandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

PRODUKTLEGENSCHAFTEN

Ihre Push Med Ellenbogenbandage bietet eine anpassungsfähige Dehnungs einschränkung für das Ellenbogengelenk. Dies beugt gegen Überstreckung vor. Der notwendige Einschränkungsgrad kann leicht mit einer Hand eingestellt werden. Zwei Verstärkungen unterstützen und führen die Flexion- und Extensionsbewegungen. Sogenaunte Komfortbereiche aus gepolstertem Material wurden um empfindliche Stellen des Ellenbogens herum eingebaut. Eine gute anatomische Passform, das Material und der Silikonereinsatz tragen dazu bei, dass die Bandage bei Bewegungen nicht verrutscht.

Die Bandage ist aus Sympress™, einem hochqualitativen komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofasern sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken. Die Push Med Ellenbogenbandage kann normal gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Beschwerden nach Hyperextensionstrauma
- Arthrose
- Bursitis olecrani
- Impingement (Zusammenstoß)

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung der Glieder kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Ellenbogenbandage ist in 5 Größen erhältlich. Ellenbogen strecken. Messen Sie den Umfang Ihres Ellenbogens wie auf der Verpackung abgebildet. Die Tabelle auf der Verpackung zeigt die richtige Größe für Ihren Ellenbogen an.

- Alle Klettverschlüsse lösen. Halten Sie die Innenseite Ihrer Hand in Richtung Ihres Körpers während Ihr Ellenbogen leicht angewinkelt ist. Benutzen Sie die Endstücke der Verstärkung, um die Bandage über Ihren Arm zu ziehen. Wechseln Sie links und rechts Ende der Verstärkung ab, um sicher zu gehen, dass die Bandage symmetrisch auf dem Arm sitzt. Die Bandage sitzt richtig, wenn Sie den Knochel des Ellenbogens in der Öffnung spüren. Heft ur arm op zodat de rits zichtbaar word en sluit deze.
- Verwenden Sie die nichtelastischen Bänder, um die gewünschte Dehnungs einschränkung festzulegen. Je mehr der Klettverschluss Richtung Hand befestigt wird, desto mehr wird die Dehnbewegung des Ellenbogens eingeschränkt.
- Schließen Sie das nichtelastische Band hinter dem Oberarm.

WASCHHINWEISE



Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und andere Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30°C im Schonwaschgang gewaschen oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleudrotprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

Um die Lebensdauer der Bandage zu verlängern, sollte sie ggf. vor der Lagerung nach jedem Benutzen getrocknet werden.

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes notwendig sein.
- Push Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Mittel abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die richtige Wahl der Größe entscheidend. Bitte passen Sie daher Ihre Bandage vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Das Fachpersonal an Ihren Verkaufsstelle wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Wenden Sie sich an den Spezialisten, wenn das Produkt individuelle Anpassungen erfordert.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihrer Push Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.
- Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte muss der Benutzer jeden schweren Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem EU-Mitgliedstaat, in dem der Benutzer ansässig ist, melden.

Push® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Nea International bv

PUSH MED ELLEBOOGBRACE

WOORD VOORAF

Push med producten bieden oplossingen binnen de behandeling en het voorkomen van letsel van het bewegingsapparaat. Verantwoord door medici en wetenschappers.

Uw nieuwe elleboogbrace is een Push med product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, confort en kwaliteit. De Push med elleboogbrace limiteert de strekking van uw arm en verlicht eventuele pijn. De fysieke belastbaarheid wordt hierdoor verhoogd. Mechanische steun en een goed positiebehoed staan hiervoor aan de basis.

Push med producten zijn innovatief en worden met zorg voor u gemaakt. Dit met het oog op maximale zekerheid en meer bewegingsvrijheid. In het belang van een tevreden gebruik.

Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push med Elleboogbrace aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push.eu.

PRODUCTLEIGENSCHAAPEN

Uw Push med Elleboogbrace biedt een traploos instelbare extensiebeperking voor het elleboog gewricht. Hierdoor wordt overstreken voorkomen. De gewenste mate van beperking is eenvoudig met één hand in te stellen. Een tweetal baleinen geven steun en richting aan de flexie- en extensiebeweging. Rond kwetsbare gebieden van de elleboog zijn zgn. comfortzones aangebracht door middel van gepolsteerd materiaal. De goede anatomische pasvorm en de siliconenapplicatie bevorderen het positiebehoed van de brace tijdens beweging. De brace is vervaardigd met Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. Door het gebruik van microfaserzels voelt de binnenzijde zacht aan en blijft de huid droog. De Push med Elleboogbrace kan probleemloos gewassen worden.

INDICATIES

- Klachten na hyperextensietrauma
- Artrose
- Bursitis olecrani
- Impingement

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuwung leiden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.

Pijn is altijd een waarschuwingsteken. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

AANMETEN / AANLEGGEN

De elleboogbrace is verkrijgbaar in 5 maten. Strek de elleboog. Meet de omtrek rond de elleboog zoals aangegeven in de tekening op de verpakking. In de tabel op de verpakking vindt u de juiste braemaat behorende bij uw elleboog omtrek.

- Maak alle klittenbanden los. Houdt de binnenkant van uw hand naar u toe gericht, terwijl uw elleboog licht gebogen is. Schuil de brace met behulp van de baleinuiteinden over uw arm. Gebruik wisselend het linker en rechter baleinuiteinde zodat de brace symmetrisch op de arm aansluit. Alternez entre les extrémités gauche et droite de la baleine de renforcement pour vous assurer que la coulière est bien symétrisée au bras. De brace bevindt zich op de juiste plaats wanneer het uitstekende deel van de elleboog voelbaar is in de uitsparing. Soulevez votre bras pour exposer la fermeture éclair et tirez sur celle-ci.
- Stel de gewenste strekbeperking in met behulp van de niet-elastische banden. De strekbeweging van de elleboog wordt sterker beperkt naarmate het klittenband meer richting hand wordt gesloten.
- Sluit aan de achterzijde van de bovenarm de niet-elastische band.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT



Sluit de klittenbanden voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.

De brace kan gewassen worden bij maximaal 30°C, fijne was of handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.

De brace mag licht gecontroleerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen (niet bij de verwarming of in een droogtrommel).

Voor een lange levensduur is het belangrijk uw brace na gebruik, indien nodig, eerst te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van uw Push brace kan een diagnose door een arts of therapeut noodzakelijk zijn.
- Push braces zijn bedoeld om op de intacte huid te dragen. Mocht de huid beschadigd zijn, dan dient de huid met een daarop geëigend middel afgedekt te zijn.
- Voor een optimale functie is een juiste maatkeuze essentieel. Past u daarom vóór aankoop uw brace om de maat te controleren. Het vakkundige personeel van uw verkoppunt legt u uit hoe u uw Push brace optimaal aanlegt. Bewaar de productinformatie zodat u later de aanleginstructies kunt nalezen.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer vóór elk gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of stiknaaden waarneembaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intact is.
- In het kader van EU verordening 2017/745 inzake medische hulpmiddelen dient de gebruiker ieder ernstig voorval in verband met het product te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU- lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

Push® is een geregistreerde merknaam van Nea International bv

BANDAGE DE COUDE PUSH MED

INTRODUCTION

Les produits Push med fournissent des solutions efficaces pour le traitement et la prévention des blessures de l'appareil locomoteur. Approuvés par les médecins et par les scientifiques.

Votre nouvelle coulière est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. La coulière Push med limite l'étirement et soulage la douleur. La résistance physique en est de ce fait augmentée. Un support mécanique et un bon maintien de la position constituent la base de son fonctionnement.

Les produits Push med sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'objectif est en effet d'atteindre la satisfaction de l'utilisateur.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser la coulière Push med. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

La codère Push med comporte une limitation d'extension réglable en permanence pour l'articulation du coude. Ainsi, la surtension peut être évitée. Le degré exigé de restriction peut facilement se régler d'une seule main. Les mouvements de flexion et d'extension sont assistés et dirigés par deux baleines de renforcement. Des bandes de confort sont en matière rembourrée ont été prévues autour des zones vulnérables du coude. Un ajustement anatomique approprié, associé à une application de silicone, permet à la coulière de rester en place lorsque vous êtes en mouvement.

La codère est faite en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibres rend l'intérieur doux et maintient la peau sèche. La coulière Push med se lave normalement.

INDICATIONS

- Affections après traumatisme d'hyperextension
- Arthrose
- Bursite oléocranienne
- Choc

Il n'existe aucune affection connue en raison de laquelle l'orthèse ne doit pas ou ne peut pas être portée. En cas de mauvaise circulation sanguine dans les membres, une orthèse peut provoquer une hyperémie. Ne serrez pas excessivement l'orthèse, au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

La coulière est disponible en 5 diverse dimensions. Radrizzare il gomito. Misurate la circonferenza del gomito, come illustrato nella figura riportata sulla confezione. Nella tabella riportata sulla confezione potrete individuare le dimensioni corrispondenti al vostro gomito.

- Dégager toutes les fermetures à boucles. Gardez l'intérieur de votre main vers vous avec votre coude légèrement plié. Utilisez les extrémités des baleines de renforcement pour faire glisser la coulière sur votre bras. Alternez entre les extrémités gauche et droite de la baleine de renforcement pour vous assurer que la coulière est bien symétrisée au bras. La coulière est correctement placée quand vous sentez que la partie saillante du coude se trouve dans l'ouverture. Soulevez votre bras pour exposer la fermeture éclair et tirez sur celle-ci.
- Utilisez des bandes non-élastiques pour régler la restriction d'extension requise. Plus la fermeture à boucles et à crochets est attachée près de la main, plus le mouvement d'étirement du coude sera limité.
- Fermez la bande non-élastique derrière le bras.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger l'orthèse et l'autre linge.

L'orthèse peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30°C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher l'orthèse à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge). Pour prolonger la durée de vie de l'orthèse, celle-ci devrait être séchée après avoir été utilisée et, au besoin, avant d'être rangée.

ATTENTION

- L'utilisation appropriée de l'orthèse Push peut nécessiter le diagnostic d'un médecin ou d'un thérapeute.
- Les orthèses Push sont prévues pour être portées sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille d'orthèse adéquate. Essayez donc l'orthèse avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre orthèse Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de l'orthèse à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Contrôlez votre orthèse Push avant chaque utilisation, pour vérifier qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de vieillissement de ses éléments ou de ses coutures. Votre orthèse Push ne peut fonctionner de manière optimale que s'il est entièrement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

GOMITIERA PUSH MED

INTRODUZIONE

I prodotti Push Med offrono efficaci soluzioni per il trattamento e la prevenzione di lesioni all'apparato locomotore. Sono inoltre approvati da medici e ricercatori.

La vostra nuova gomitiera è un prodotto Push Med, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, confort e qualità. La gomitiera Push Med limita l'estensione fornendo sollievo dal dolore. Ciò consente di accedere la forza fisica. Il supporto meccanico e il buon mantenimento della postura costituiscono la base delle sue prestazioni.

I prodotti Push Med sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza ed una maggiore libertà di movimento. Ciò allo scopo di garantire un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare la gomitiera Push Med, vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domande e osservazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La vostra gomitiera Push Med consente di limitare in modo costantemente regolabile l'estensione dell'articolazione del gomito. Ciò consente di prevenire l'overstretching. Il livello desiderato di limitazione può essere regolato facilmente con una sola mano. Due rinforzi forniscono appoggio e direzione ai movimenti di flessione e di estensione. Attorno alle aree vulnerabili del gomito sono state create delle cosiddette «zone di conforto» in materiale imbottito. Grazie alla corretta linea anatomica, al materiale ed all'applicazione di silicone, il prodotto resta in posizione durante il movimento.

Il prodotto è realizzato in Sympress™, un materiale confortevole di alta qualità. L'uso di microfibre rende la parte interna morbida e lo mantiene la pelle asciutta. La gomitiera Push Med può essere lavata normalmente.

INDICAZIONI

- Disturbi a seguito di trauma in iperestensione
- Artrosi
- Borsite dell'olecrano
- Conflitto

Non vi sono disturbi noti che sconsigliano l'utilizzo del tutore. In caso di circolazione sanguigna insufficiente negli arti, il tutore può causare iperemia. Evitare di applicare il tutore stringendolo eccessivamente all'incizio. Il dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o i disturbi peggiorano, è consigliabile consultare il vostro medico o il vostro fisioterapista.

COME STABILIRE LE GIUSTE DIMENSIONI/LA GIUSTA TAGLIA

La gomitiera è disponibile in 5 diverse dimensioni. Radrizzare il gomito. Misurate la circonferenza del gomito, come illustrato nella figura riportata sulla confezione. Nella tabella riportata sulla confezione potrete individuare le dimensioni corrispondenti al vostro gomito.

- Aprire tutte le chiusure a gancho e occhio. Tenete il palmo della mano verso di voi e piegate leggermente il gomito. Utilizzate le estremità di rinforzo per fare scorrere la gomitiera sul braccio. Alterate le estremità di rinforzo di sinistra e destra ed assicuratevi che la gomitiera cada in modo simmetrico sul braccio. La gomitiera sarà posizionata correttamente quando sentirete la parte sporgente del gomito nell'apertura. Sollevate il braccio per esporre la cerniera e chiuderla.
- Utilizzate le cinghie non elastiche per regolare la limitazione desiderata dell'estensione. Attaccando la chiusura a gancho e occhio in un punto vicino alla mano, avrete una maggiore limitazione del movimento di estensione del gomito.
- Chiudete la cintura non elastica dietro al braccio.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Prima del lavaggio, chiudere le chiusure a gancho e occhio per proteggere il prodotto e gli altri capi da lavare.

Il prodotto può essere lavato fino ad temperatura di 30°C, a mano o utilizzando un ciclo per tessuti delicati. Non utilizzare alcun candeggino.

È possibile utilizzare un ciclo delicato di centrifuga: una volta terminato, stendete il prodotto ad asciugare all'aria aperta (non nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria).

Per prolungare la durata del prodotto vi consigliamo di asciugarlo dopo l'uso, se necessario, prima di conservarlo.

IMPORTANTE

- Per un corretto uso del prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un fisioterapista.
- I tutori Push sono destinati ad essere indossati sulla cute perfettamente integra. La cute eventualmente danneggiata dovrà essere coperta prima dell'applicazione con materiale adeguato.
- El rendimiento óptimo solo puede conseguirse eligiendo la talla adecuada. Pruebe la protector antes de comprarlo para asegurarse de la talla. Si el personal profesional de su distribuidor le explicará la mejor forma de ajustarse la tobillera Push. Experimente a ligadura antes de comprar, para verificar o tamaño. O pessoal profissional do seu revendedor explicará a melhor maneira de experimentar a ligadura Push. Recomendamos que guarde esta informação do produto num local seguro para a poder consultar e obter instruções de ajuste sempre que necessário.
- Consulte a un especialista en este tipo de productos si necesita una adaptación personal.
- Revise su tobillera Push cada vez que vaya a ponérsela, por si tuviera indicios de desgaste o envejecimiento de los componentes o las costuras. El desempeño ideal de su ligadura Push sólo se puede garantizar si el producto está completamente intacto.
- En el marco del Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios, el usuario debe informar de cualquier incidente grave relacionado con el producto al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que viva.

Push® è un marchio registrato di Nea International bv

CODERA PUSH MED

INTRODUCCIÓN

Los productos Push med proporcionan soluciones para el tratamiento y la prevención de lesiones del aparato locomotor. Están recomendados por médicos y científicos.

La nueva codera es un producto Push med caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. La codera Push med reduce los estiramientos musculares y alivia el dolor. Esto sirve para aumentar la resistencia física. El soporte mecánico, la presión ajustable y una buena retención de la posición constituyen la base de su rendimiento.

Los productos Push med son realmente innovadores y están fabricados para usted con un esmerado cuidado. Esto garantiza el máximo de seguridad y una mayor libertad de movimientos. Para un mejor aprovechamiento de su uso le recomendamos la información del producto antes de utilizarlo. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a info@push.eu.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La codera Push med ofrece una reducción de la extensión de la articulación del codo continuamente ajustable, esto previene los sobreesfuerzos. El grado de reducción requerido se puede fijar fácilmente con una mano. Dos refuerzos proporcionan apoyo y dirección a los movimientos de flexión y extensión. Alrededor de los puntos vulnerables del codo se han creado zonas confortables de material acolchado. Un adecuado ajuste anatómico, junto con el material y la aplicación de silicona, contribuyen a que la codera no se desplace con los movimientos.

La codera está hecha de Sympress™, un cómodo material de gran calidad. El uso de microfibras proporciona una sensación suave y mantiene la piel seca. La codera Push med se puede lavar de forma normal.

INDICACIONES

- Molestias tras traumatismo de hiperextensión
- Artrosis
- Bursitis del olecranon
- Efecto

No se conocen trastornos que sugieran que no deba utilizarse el protector. En caso de mala circulación sanguínea en las extremidades, un protector puede causar hipermia. Evite apretar demasiado a ligadura al principio.

El dolor es siempre una señal de aviso. Si el dolor continúa, es aconsejable consultar con el médico o el fisioterapeuta.

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO / AJUSTE

La codera se encuentra disponible en 5 tallas. Estire el brazo. Mida la circunferencia del codo como se muestra en la ilustración del envoltorio. El cuadro que viene en el envolt

